


フィルムカセットの交換




1 「STOP」マークが出たら、フィルムが残りわずかです。

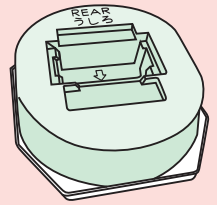

フィルム送りボタン

2 フィルム送りボタンを押します。フィルムの残りがなくなるまで長押しを繰り返します。


3 電源プラグを抜き、座面・便座等を取り外します。

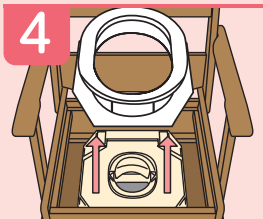

4 空になったフィルムカセットの容器を取り外します。

5 ヒーターを露出させる


フィルムサポート(白い樹脂部品)を押し、ヒーターを露出させる。

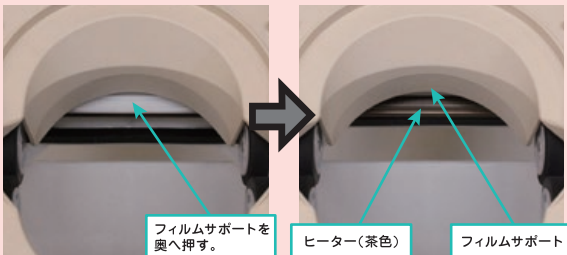

フィルムサポートを奥へ押す。

ヒーター(茶色)


フィルムサポート

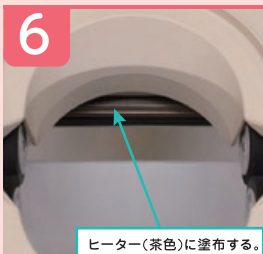


ヒーター(茶色)に塗布する。

6 ヒーターにシリコンを塗布する


シリコンクロス(茶色)のシリコン塗布面を使用し、ヒーターに潤滑剤を満遍なく塗布する。

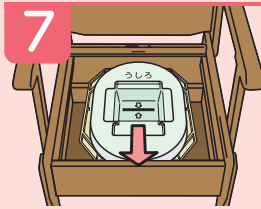

7 新しいフィルムカセットを置きます。

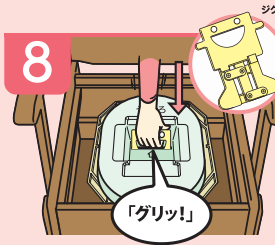

8 ジグリンを抵抗がなくなるまで垂直に押し込み、抜きます。

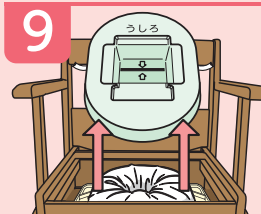


9 フィルムカセットのふたを外し、座面・便座等を取り付けます。

10 電源プラグを差します。

状態ランプが緑点灯していることを確認します。

11 作動ボタンを押し初期設定をします。

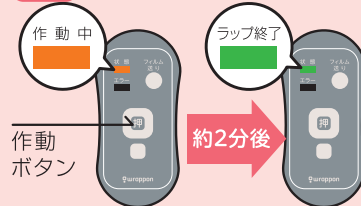

作動中
作動ボタン

ラップ終了
約2分後

状態ランプがオレンジになります。初期設定は約2分かかります。



12 状態ランプが緑点灯していることを確認します。

切り離されたフィルムを取り出して、準備完了です。


ラップポン・エブリの使い方

1



凝固剤を入れます
ラップポン専用凝固剤
カタメルサー・紙を約
1杯入れます。

2

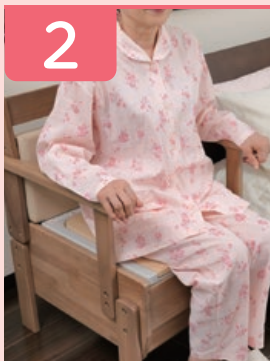

用を足します
必ず座って
ご使用ください。

3



**作動ボタンを
押します**
ご使用后、便座から
離れて手元スイッチの
作動ボタンを押します。

4

状態ランプを確認します

約2分後、状態ランプが緑点灯に
変わり、「ピッピッピ」と音がなったら
処理終了です。



5



袋を取り出します
トレーを引き出し、
ラップされた排泄ゴミ
を指定のゴミ箱に捨
てます。

ラップ動作が終了する
までフィルムを引っ張
らないでください。

困ったときは、、、

取扱説明書P.23「困ったときには」をご参照
下さい。

問題が解消できない時はお買い上げの販売店
または、ラップポンセーフティーコールに
お問い合わせください。

● お問い合わせ先

 **日本セイフティー株式会社**
NIHON SAFETY CO.,LTD.
ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail : kaigo@nihonsafety.com URL : http://www.wrappon.com

ラップポン
セーフティーコール  **0120-208-718**
ニ オ ワ ナ イ フ

受付時間：月～金 9:00～17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせて
いただくことがありますので、予めご了承ください。

● 販売店