


ラップポンの注意ポイント

下記に注意してご使用ください



トレー(ラップポンの下)に
ゴミを溜めないでください。

トレーのラップゴミを取らずにご使用になると
フィルムが詰まったような状態になります。
切断不良やエラー発生の原因になります。

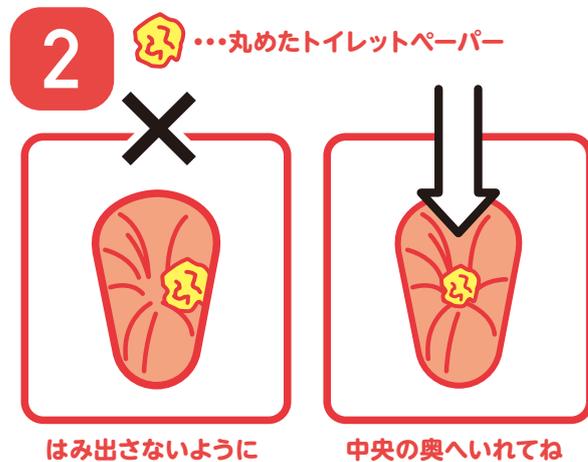

トイレットペーパーをご使用
の場合、フィルムの中央付近
に押し込んでください。

軽いトイレットペーパーは袋の中に入りきらずにフィルムの
溶着部分に挟み込んでしまうことがあります。
切断不良やエラー発生、漏れの原因になります。



トレーは正常な位置に戻して
から動作させてください。

ラップゴミがトレーに乗らずに取りにくくなります。
バーが付いているトレーの場合、バーにラップゴミが当たると
正常に処理できないことがあります。



座ったままおすボタンを
押さないでください。

座ったまま作動開始すると、荷重がかかり、フィルムが正常
に送られない場合があります。
切断不良や漏れの原因になります。

ラップポン・ブリオの使い方

1 凝固剤を入れ、用を足します。

2 使用したウェットティッシュ・トイレットペーパーをフィルム内に捨てます。

上の方にあると漏れの原因になりますので、右記の点線より奥まで押し込んでください。

中心の奥に捨ててね




3 立ち上がり、「おすボタン」を約1秒押ししてください。
※座ったまま「おすボタン」を押さないでください。



4 絶対に引っ張らないでください。表示画面のカウントダウンが0に変わるまで約90秒待ってください。お知らせ音の「ピッピッピ」が鳴るまで触らないでください。



5 袋をトレーから取り出し、毎回捨ててください。

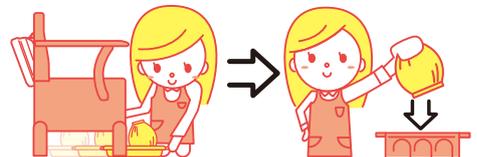

● お問い合わせ先

 **日本セイフティー株式会社**
NIHON SAFETY CO.,LTD.
ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail : kaigo@nihonsafety.com URL : <http://www.wrappon.com>

ラップポン
セイフティーコール  **0120-208-718**
ニ オ フ ナ イ フ

受付時間：月～金 9:00～17:30
土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます。
いただくことがありますので、予めご了承ください。

● 販売店

