


ラップボン・エールの使い方

1 凝固剤を入れ、用をたします。



2

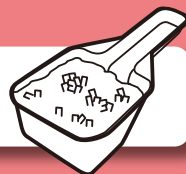

使用したウェットティッシュ・
トイレットペーパーをフィルム内に
捨てます。

上の方にあると漏れの原因になりますので、
左記の点線より奥まで押し込んでください。

3

立ち上がり、「押ボタン」を押してください。

※座ったまま「押ボタン」を押さないでください。

4

絶対に引っ張らないでください。

状態ランプがオレンジから緑に変わるまで
約2分待ってください。

お知らせ音の「ピピピ」がなるまで触らないでください。



5

袋を下から取り出し、毎回捨ててください。



● お問い合わせ先

● 販売店

 **日本セイフティー株式会社**
NIHON SAFETY CO., LTD.
ラップボン事業部


〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail : kaigo@nihonsafety.com URL : <http://www.wrappon.com>

ラップボン
セイフティーコール  **0120-208-718**
ニ オ ワ ナ イ ワ

受付時間：月～金 9:00～17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせて
いただくことがありますので、予めご了承ください。


フィルムカセットの交換

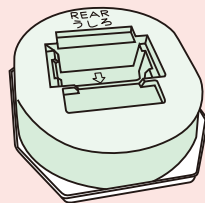


1 「STOP」マークが出たら、フィルムが残りわずかです。




2 フィルム送りボタンを押します。
フィルムの残りがなくなるまで長押しを繰り返します。

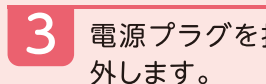


3 電源プラグを抜き、座面・便座等を取り外します。

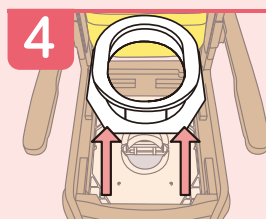


4 空になったフィルムカセットの容器を取り外します。

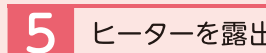


5 ヒーターを露出させる
フィルムサポート(白い樹脂部品)を押し、ヒーターを露出させる。

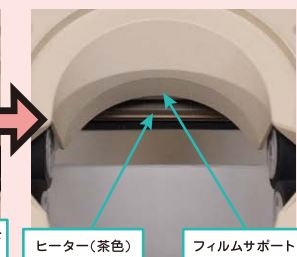


6 ヒーターにシリコンを塗布する
シリコンクロスのシリコン塗布面を使用し、ヒーターに潤滑剤を満遍なく塗布する。

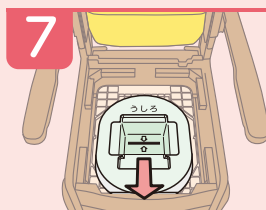


7 新しいフィルムカセットを置きます。

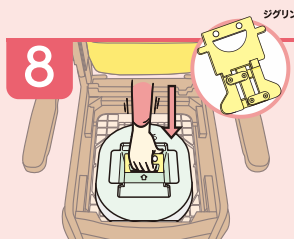


8 ジグリンを抵抗がなくなるまで垂直に押し込み、抜きます。

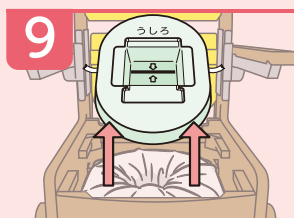


9 フィルムカセットのふたを外し、座面・便座等を取り付けます。

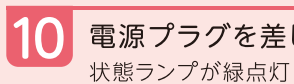

10 電源プラグを差します。
状態ランプが緑点灯していることを確認します。

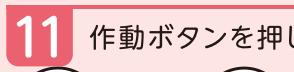

11 作動ボタンを押し初期設定をします。

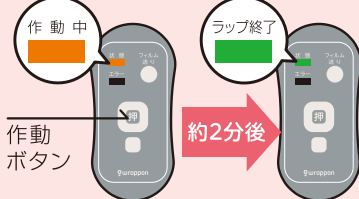

状態ランプがオレンジになります。初期設定は約2分かかります。



12 状態ランプが緑点灯していることを確認します。
切り離されたフィルムを取り出して、準備完了です。