


組立てトランク型自動ラップ式トイレ

ラップポン・トレッカー

TR-SE-0001J

ハンディ・マニュアル

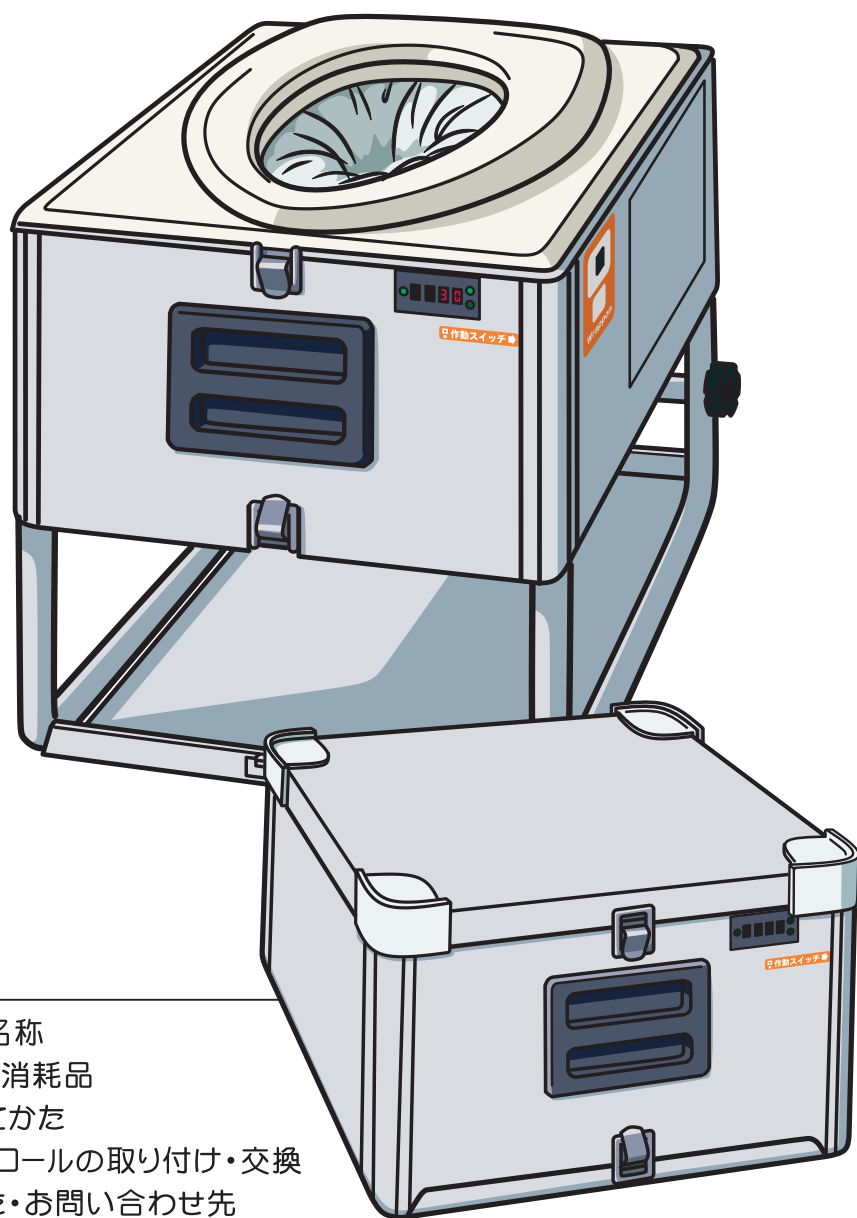

もくじ

- P.1.....各部の名称
- P.3.....付属品・消耗品
- P.4.....組み立てかた
- P.5.....フィルムロールの取り付け・交換
- P.7.....使いかた・お問い合わせ先



日本セイフティー株式会社

各部の名称

「水を使わない」「臭わない」「お手入れ簡単」
ラップで包む新発想のトイレ
ラップポン・トレッカー

【前面】

上ふた

収納時にキズやほこりを防ぐ

便座

簡単にとりはずせて
お手入れ簡単

インサイドカバー

排泄物の飛沫を防ぐ

取っ手

前後に1つずつ付いていて
持ち運びに便利

本体

工具なしで組み立て簡単
サビに強いアルミ製

表示窓

使用状況・回数やエラーを
わかりやすく表示

底ふた

取り出しやすい引き出し式

作動スイッチ


使用后、このスイッチを
1回押すだけで処理（ラップ）開始

脚

収納に便利な折りたたみ式

【背面】


電源コード差込口

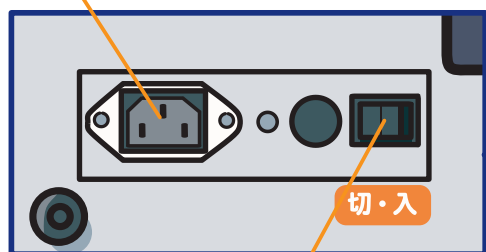

主電源

取っ手

補強棒

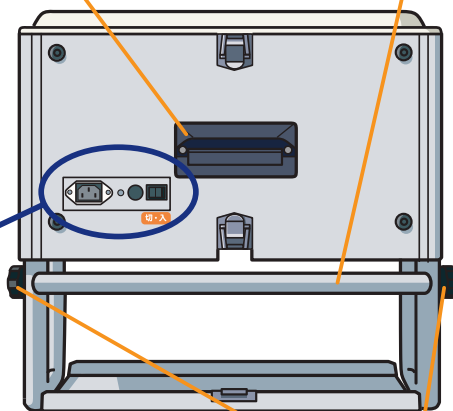

ネジ

【内部】 便座・インサイドカバーをはずした状態


しおり差込口
しおりを差し込む

青色スイッチ
フィルム送り

黄色スイッチ
初期設定


ラップ型便器

ローラー

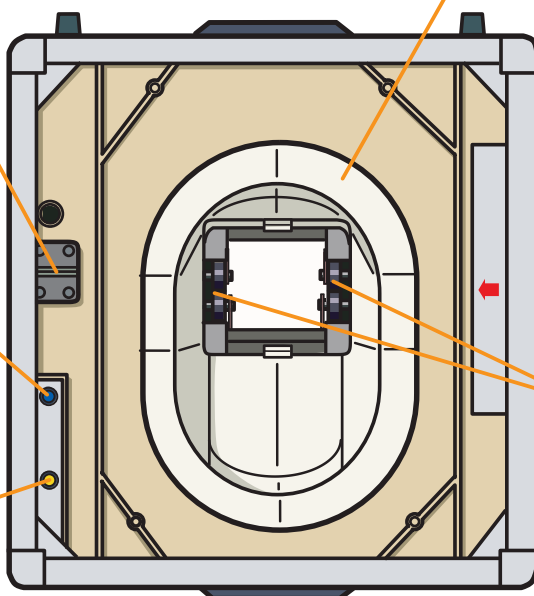

部品・付属品

ラップポン・トレッカーと一緒に梱包されている
ものです。そろっているかどうかご確認ください。

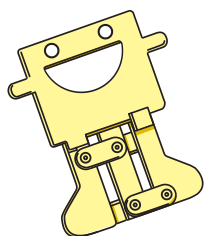

ジグリン

フィルムロールをローラーに
はさみこお時に使用します。
(品番：C0J10001S)



緊急袋

停電等でも安心の給水パッド付き
便器用緊急袋です。
(品番：C0EM2001J)

取扱説明書

ハンディ・マニュアルより
詳しい説明書です。
(品番：TRMA1NS2J)

ハンディ・マニュアル

この冊子です。
(品番：TRMAHAN2J)

保証書

なくさないように大切に保管
してください。
(品番：C0GU01AAS)

【ラップポン・トレッカーとして添付されているもの】

補強棒

底ふたを取りはずすと入っています。
脚部を補強します。
(品番：TRST0001S)

ネジ(2個)

底ふたを取りはずすと入っています。
補強棒を取り付けるときに使用します。
(品番：TRBLN0B1S)

電源コード

上ふた、便座を取りはずすと
入っています。
(品番：TRPC0001J)

ラッパ型便器

上ふた、便座を取りはずすと
入っています。
(品番：C0FG0004S)

インサイドカバー

便座の内側に
セットされています。
(品番：TRMUUS01S)

消耗品

ラップポン・トレッカーをご使用の際に必ず使用します。
ご注文は、裏表紙記載のフリーコールまで。




カタメルサー

1袋で約50回分
おからでできた凝固剤
(品番：C0C0ST01J)



カタメルポリマー

1袋で使い切り1回分
ポリマータイプの凝固剤
(品番：C0C0P001J)

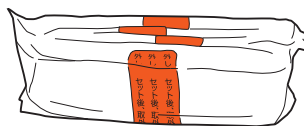

フィルムロール










1ロール約50回分
ポリエチレン防臭5層構造
(品番：C0F150C1B)




ウェットティッシュ

1袋100枚入
ノンアルコール・無香料
除臭効果のある緑茶エキス配合
(品番：C0WT0002J)

組み立てかた

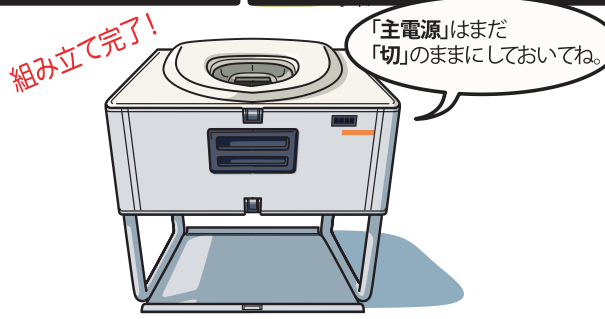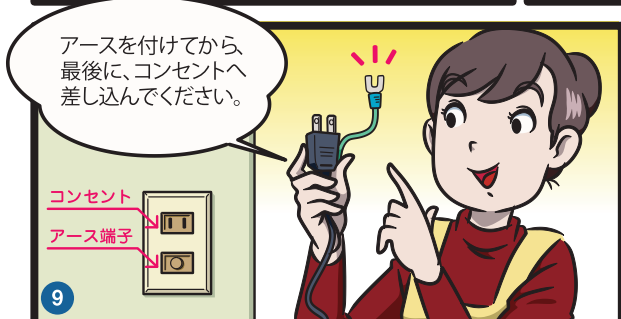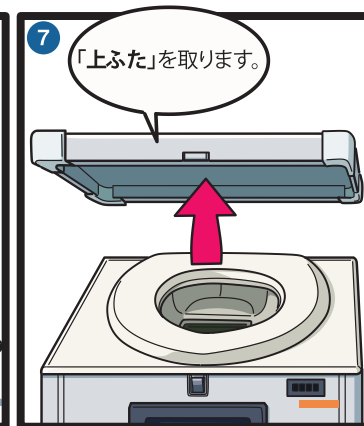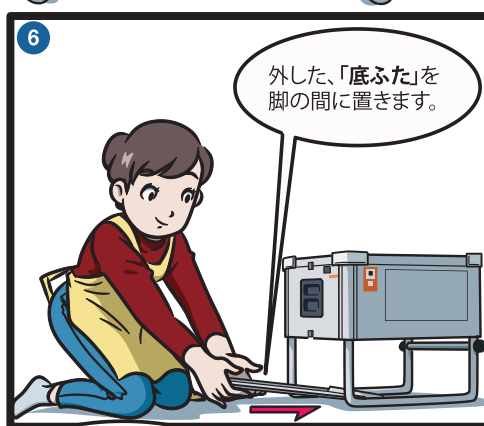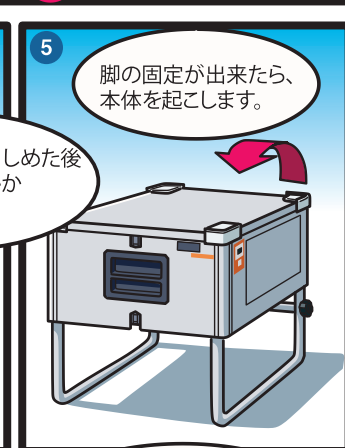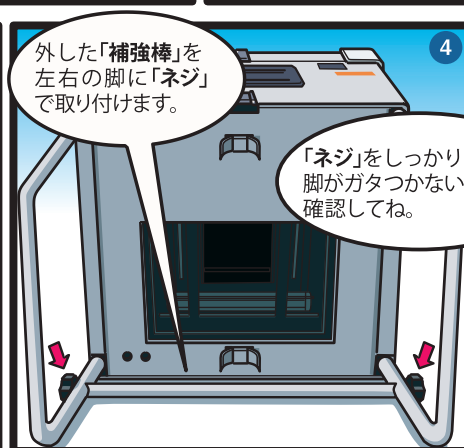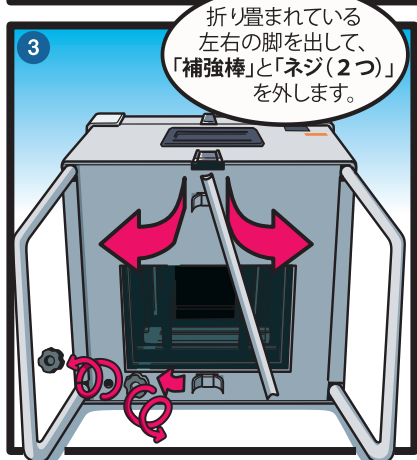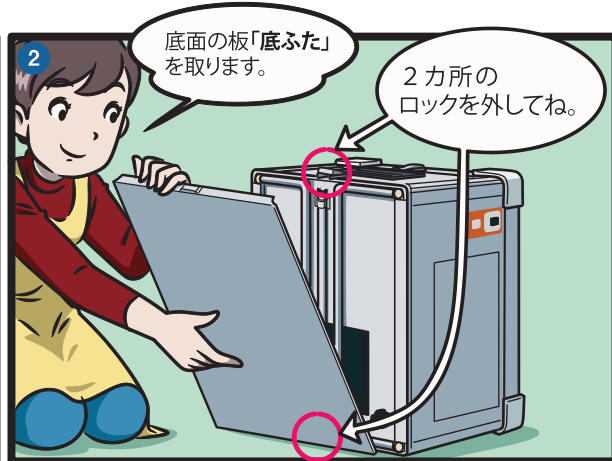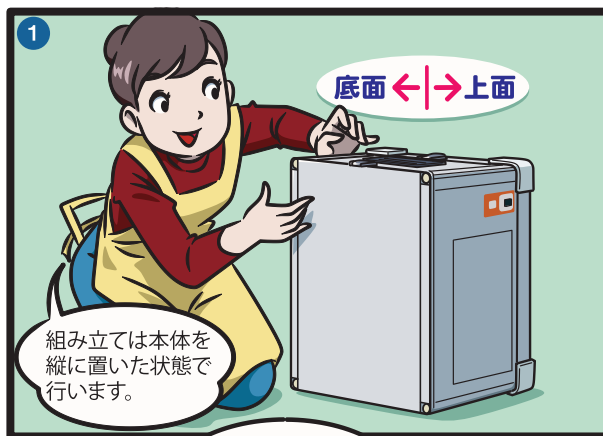


フォームロールの取り付け・交換

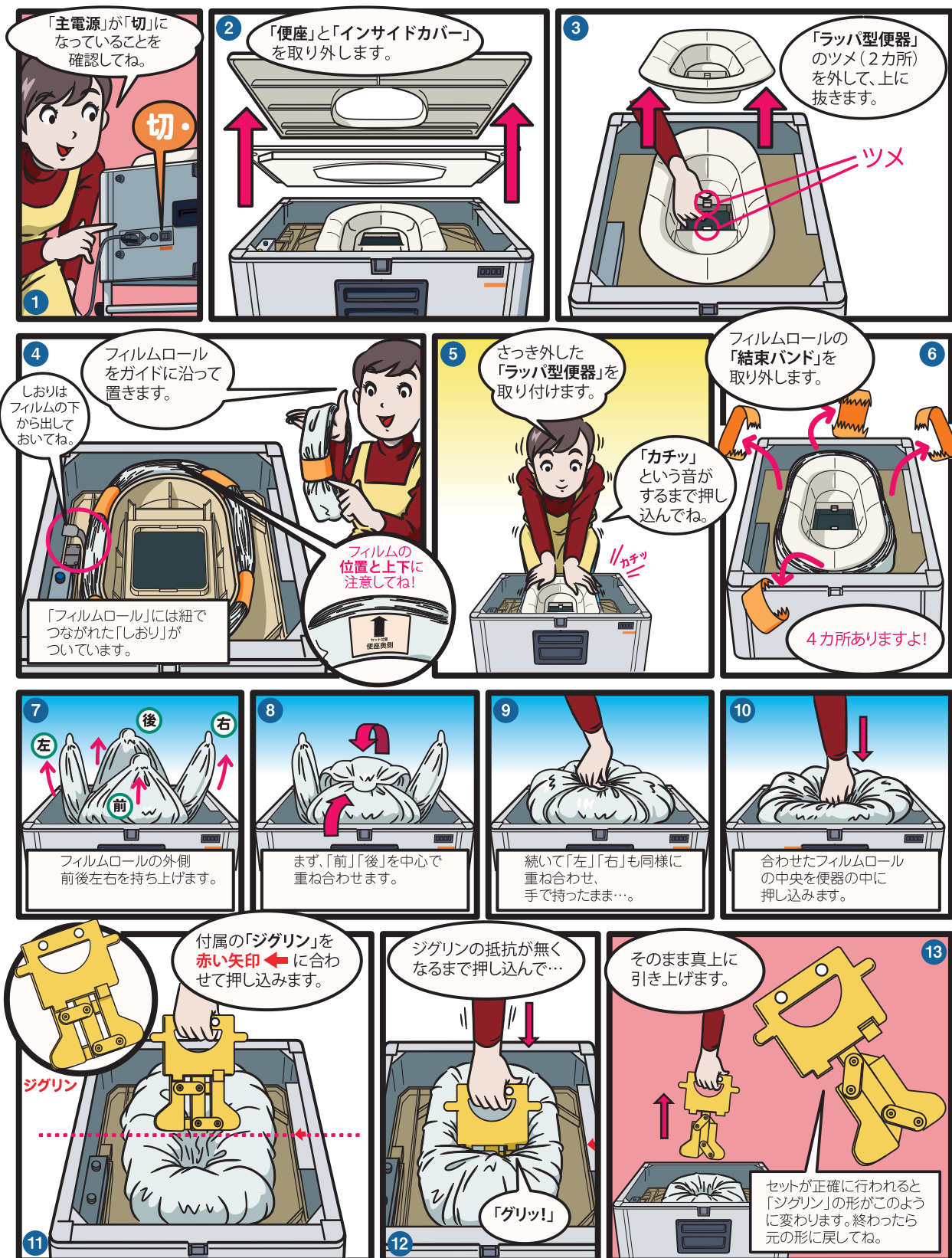

ご使用の前に、必ずフィルムロールを取り付けます。
主電源が「切」になっているか確認してください。




フィルムに「STOP」の文字が出たら… (フィルムロールの交換)

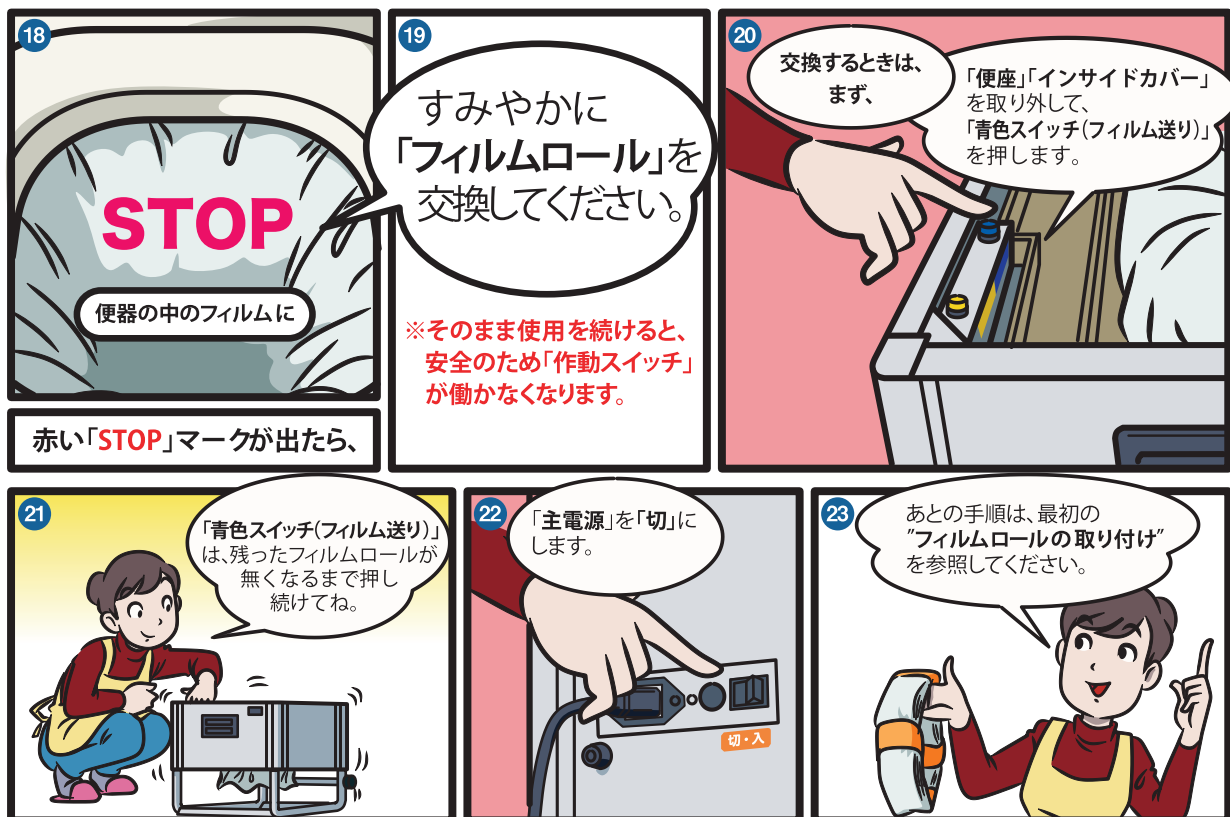

使いかた

便器の中に手を入れないでください。
洋式便所の姿勢でお座り下さい。

●ご使用前に、表示窓の動作ランプが緑色に点灯していることを確認してください。

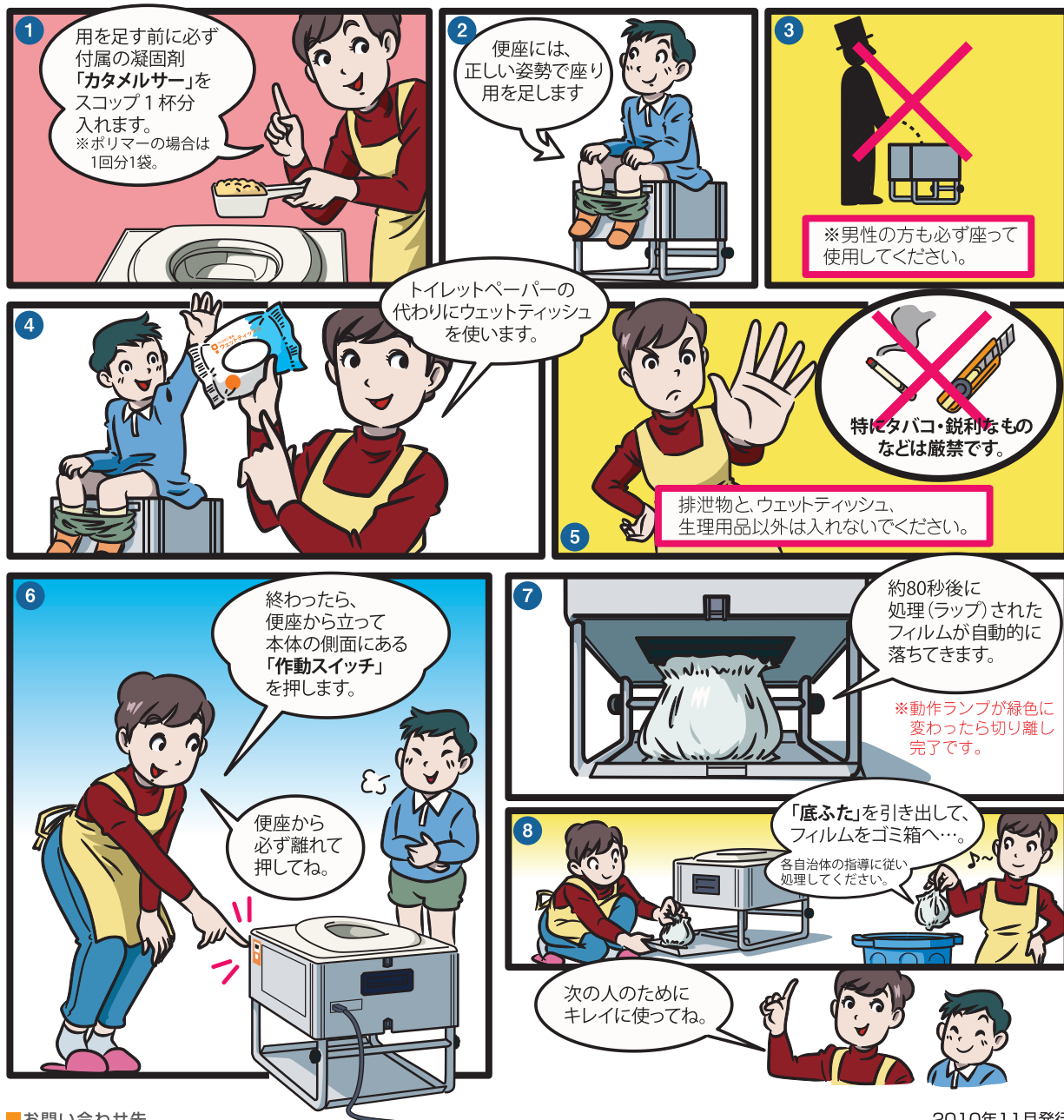

■お問い合わせ先

ラッポンセーフティーコール

0120-208-718

資料ご希望の方は、フリーダイヤル・メール・ホームページからお気軽にどうぞ!

<http://www.wrappon.com>

E-mail:kaigo@nihonsafety.com

日本セーフティー株式会社

ラッポン事業部 〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-11
TEL.03-5689-5953 FAX.03-5689-5957

2010年11月発行