


組立てトランク型自動ラップ式トイレ

ラップポン・トレッカー2

ハンディ・マニュアル

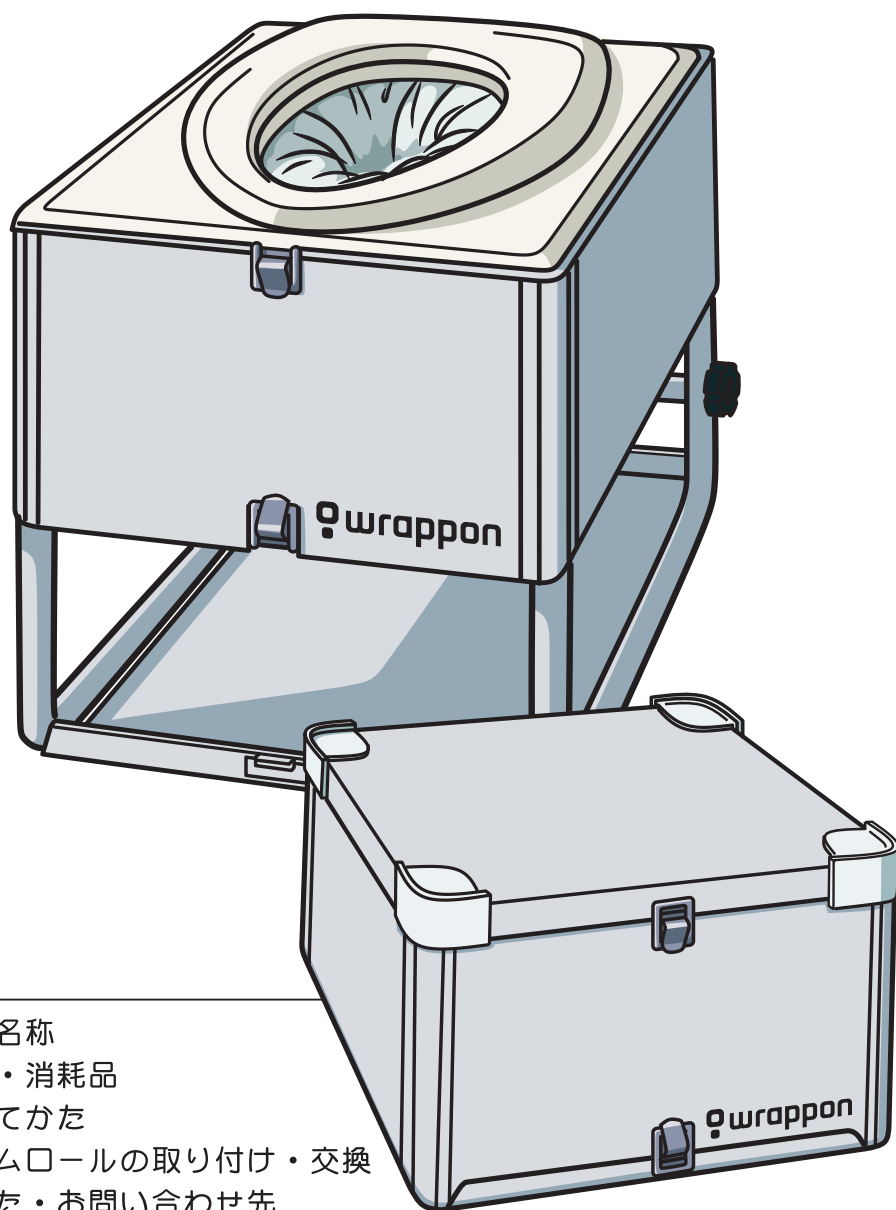

もくじ

- P.1・・・各部の名称
- P.3・・・付属品・消耗品
- P.4・・・組み立てかた
- P.5・・・フィルムロールの取り付け・交換
- P.7・・・使いかた・お問い合わせ先



日本セイフティー株式会社

各部の名称

「水を使わない」「臭わない」「お手入れ簡単」
ラップで包む新発想のトイレ
ラップポン・トレッカー2

【前面】

上ふた

収納時にキズやほこりを防ぐ

便座

簡単にとりはずせて
お手入れ簡単

インサイドカバー

排泄物の飛沫を防ぐ

本体

工具なしで組み立て簡単
サビに強いアルミ製

脚

収納に便利な折りたたみ式


底ふた

取り出しやすい引き出し式

【ACアダプター】

電源コード差込口

主電源

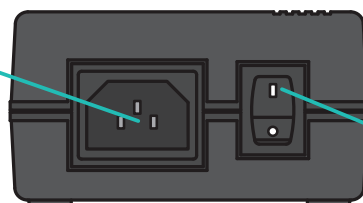


【背面】

取っ手

補強棒

ネジ

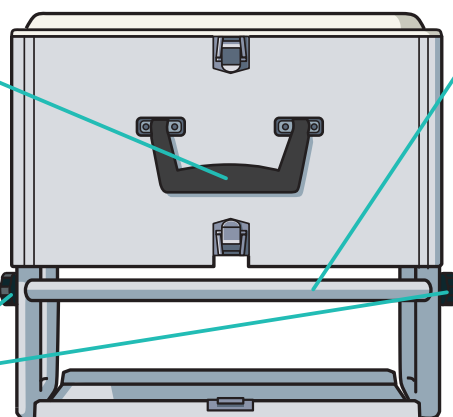

【内部】

便座・インサイドカバーを外した状態


黄色スイッチ
初期設定

青色スイッチ
フィルム送り

ラッパ

天板

ローラー

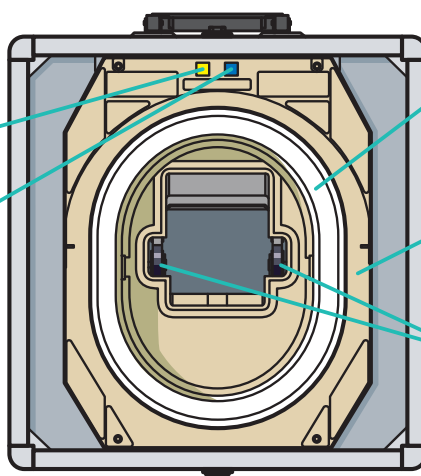


【手元スイッチ】

裏面にマジックテープ付

表示窓

ボタン

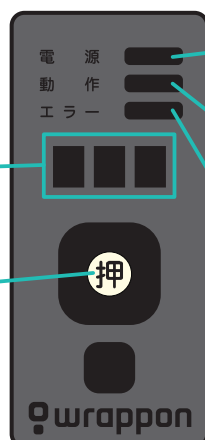


電源ランプ (緑)

動作ランプ (緑/オレンジ)

エラーランプ (赤)


部品・付属品

ラップポン・トレッカー2と一緒に梱包されているものです。そろっているかご確認ください。

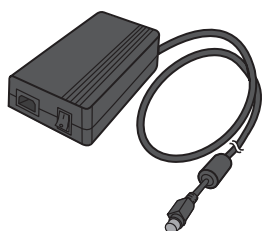


ACアダプター

(品番: WRACFJ11S)

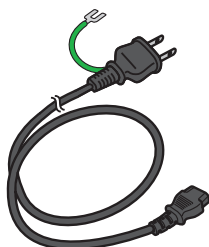

電源コード

(品番: WRPCFJ11J)

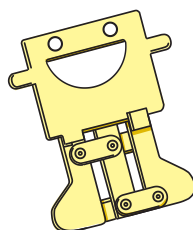

ジグリン

フィルムロールをローラーにはさみこむ時に使用します。

(品番: C0J10001S)



取扱説明書

ハンディ・マニュアルより詳しい説明書です。

(品番: TRMAT201J)

ハンディ・マニュアル

この冊子です。

(品番: TRHAT201J)

保証書

なくさないように大切に保管してください。

**ユーザー登録
ハガキ**

マジックテープ

「手元スイッチ」を固定するものです。お好きな場所に貼り付けてください。

【ラップポン・トレッカー2として添付されているもの】

補強棒

底ふたを取り外すと入っています。脚部を補強します。

(品番: TRST0001S)

ネジ(2個)

補強棒の両端に付いています。補強棒を取り付けるときに使用します。

(品番: TRBLN002S)

インサイドカバー

便座の内側にセットされています。

(品番: TRMUUS01S)

消耗品

ラップポン・トレッカー2をご使用の際に必ず使用します。ご注文は、裏表紙記載のフリーコールまで。



カタメルサー・紙

(凝固剤約50回分)1袋
(品番: C0C0ST01J)




カタメルポリマー

(凝固剤50袋入)1箱
(品番: C0C0P001J)



フィルムロール


(約50回分)1本
(品番: C0F150C1J)

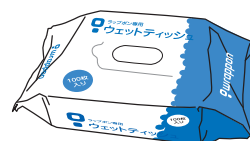


ウェットティッシュ

(100枚入)1袋
(品番: C0WT0002J)


組み立てかた

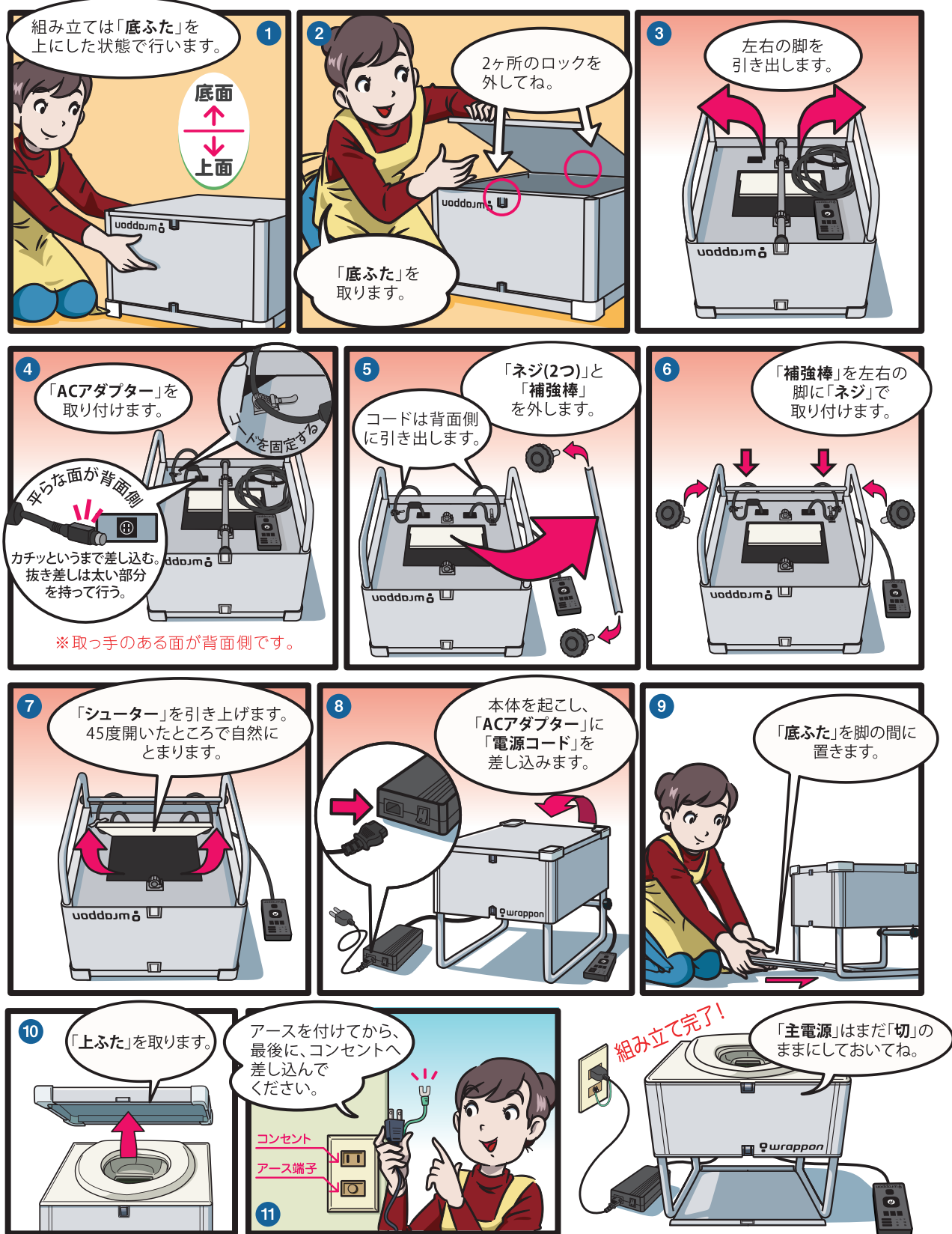


フィルムロールの取り付け・交換

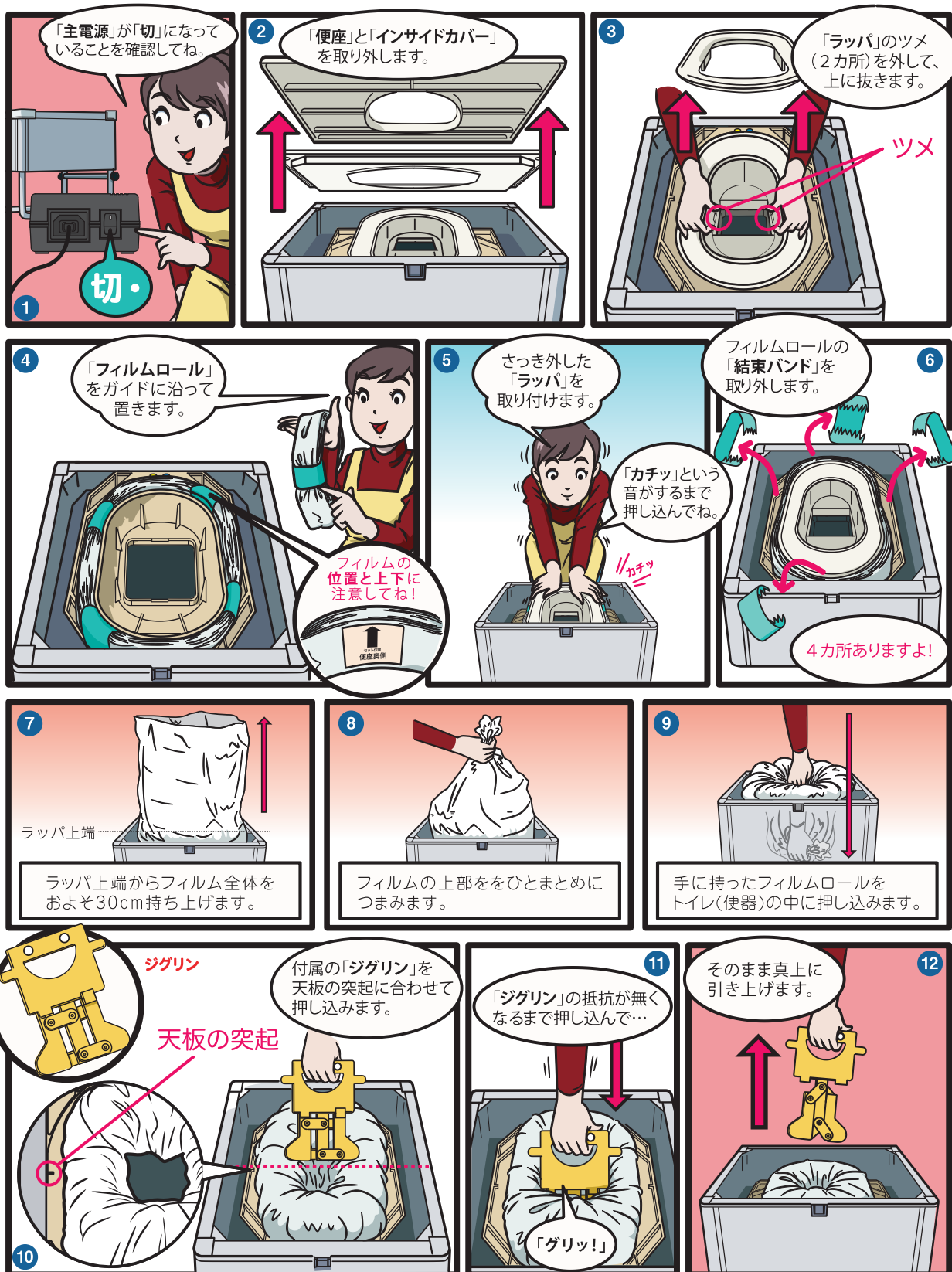

ご使用の前に、必ずフィルムロールを取り付けます。
主電源が「切」になっているか確認してください。

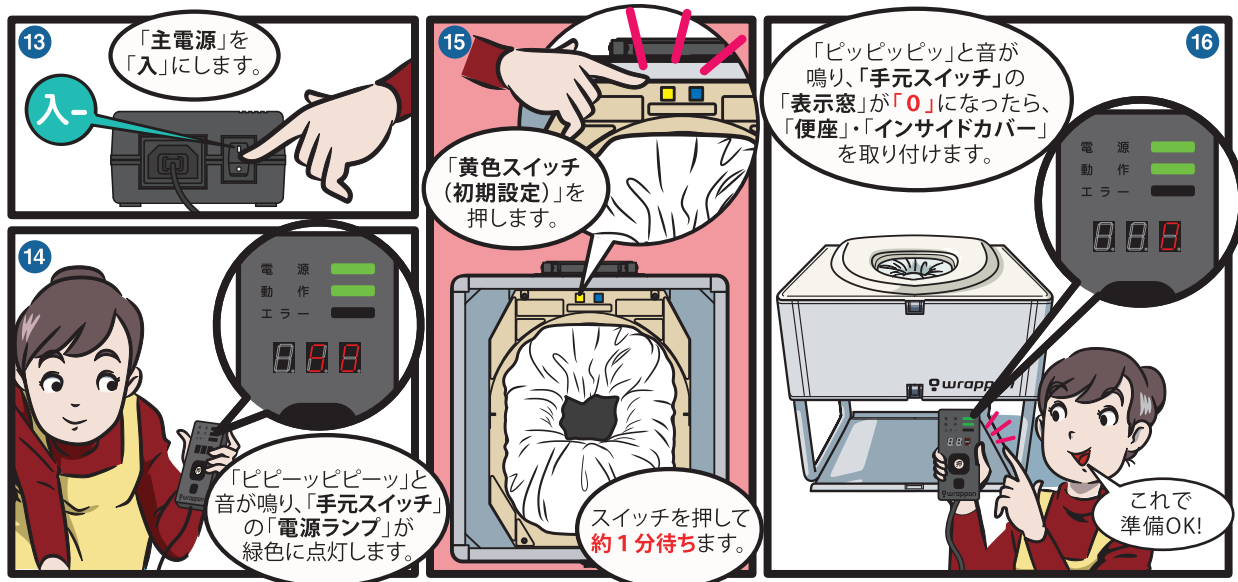


フィルムに「STOP」の文字が出たら… (フィルムロールの交換)

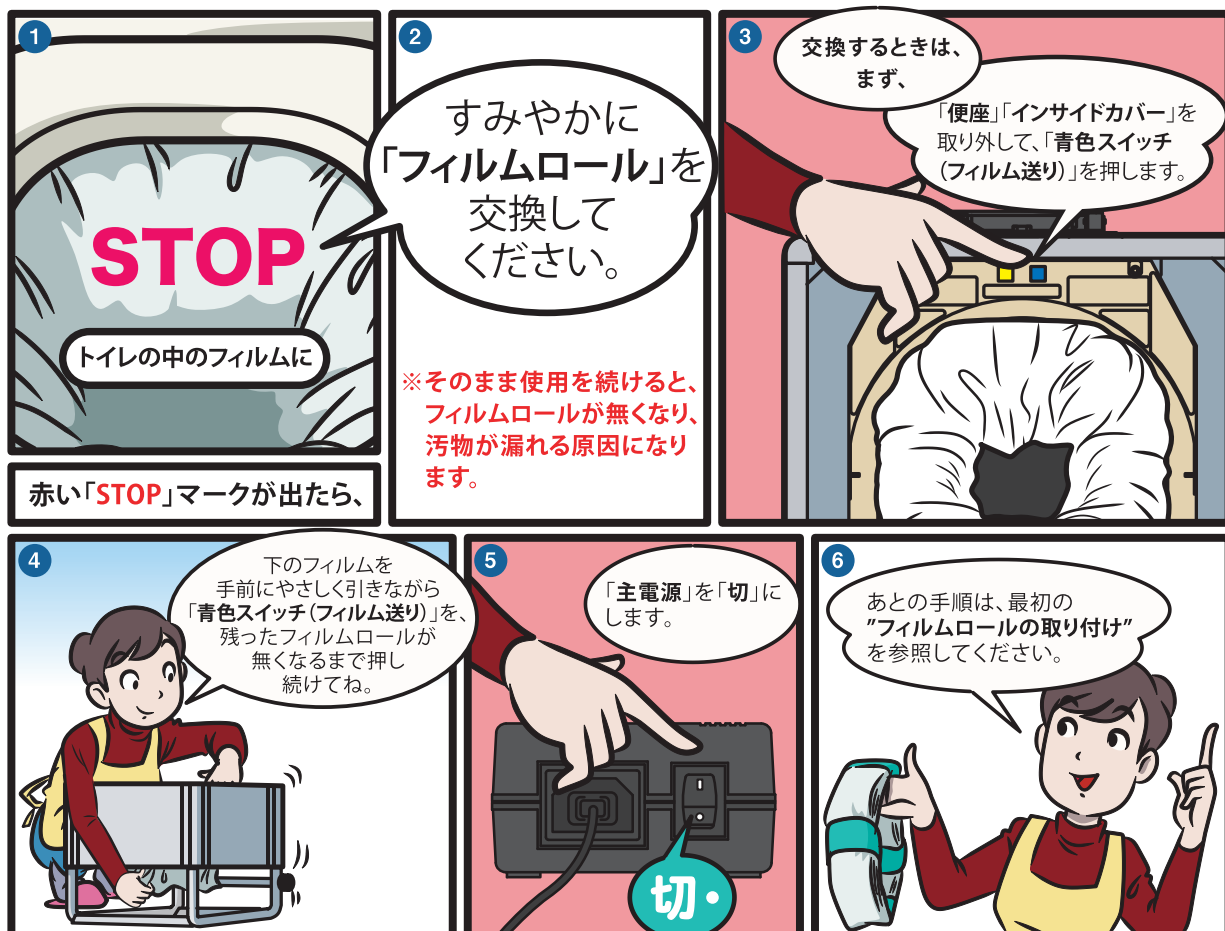

使いかた

トイレの中に手を入れないでください。
洋式便所の姿勢でお座りください。

ご使用前に、手元スイッチの動作ランプが緑色に点灯していること、フィルムロールが取り付けられていることを確認してください。

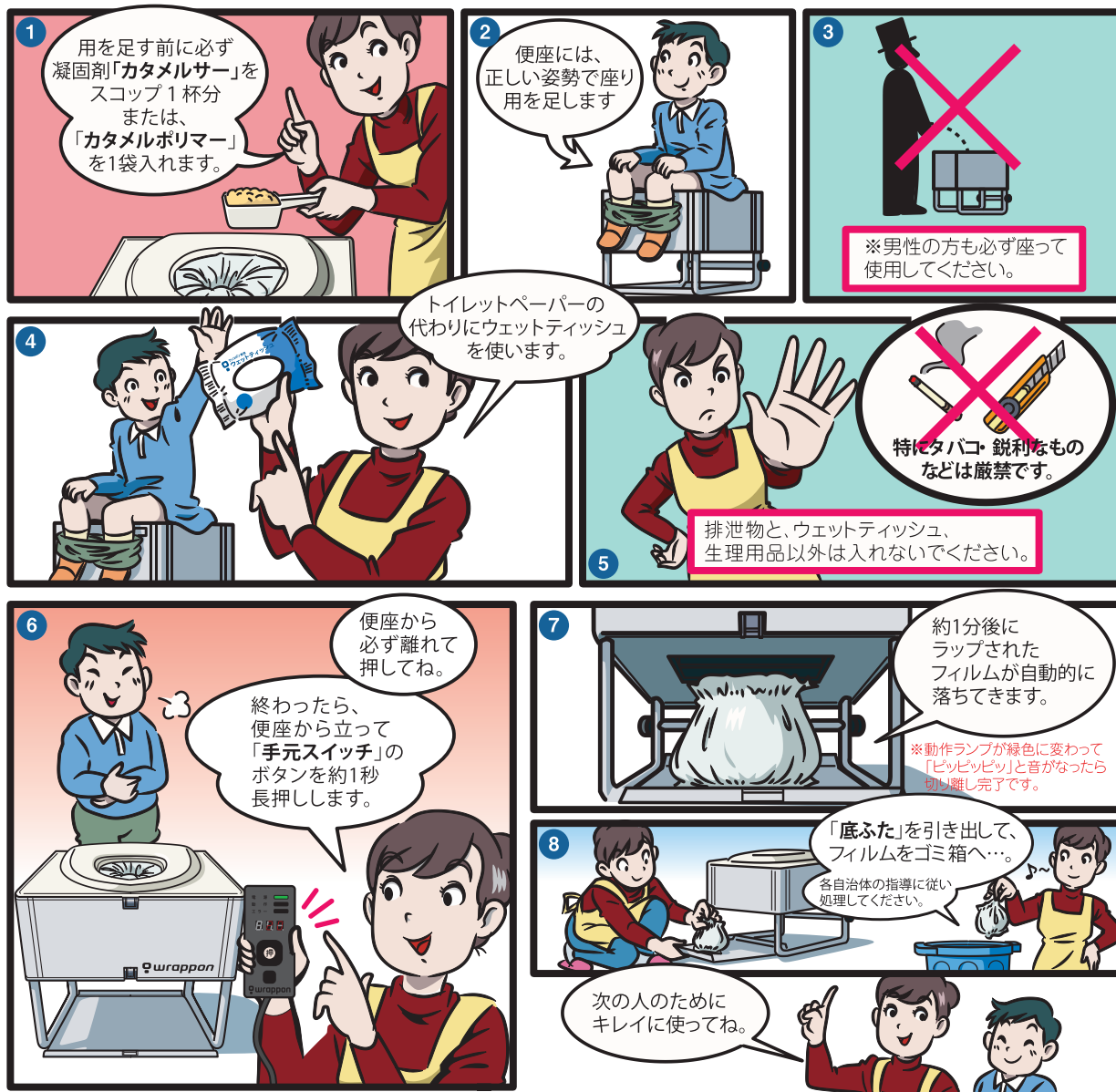

■ お問い合わせ先

■ 取扱店

日本セイフティー株式会社
ニホンセイフティー株式会社
ラップオン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F
e-mail : kaigo@nihonsafety.com URL : <http://www.wrappon.com>

ラップオン セイフティーコール **0120-208-718**

受付時間：月～金 9:00～17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます
いただくことがありますので、予めご了承ください。