


組立てトランク型自動ラップ式トイレ

# 9 ラップパン・トレッカー3

## ハンディ・マニュアル

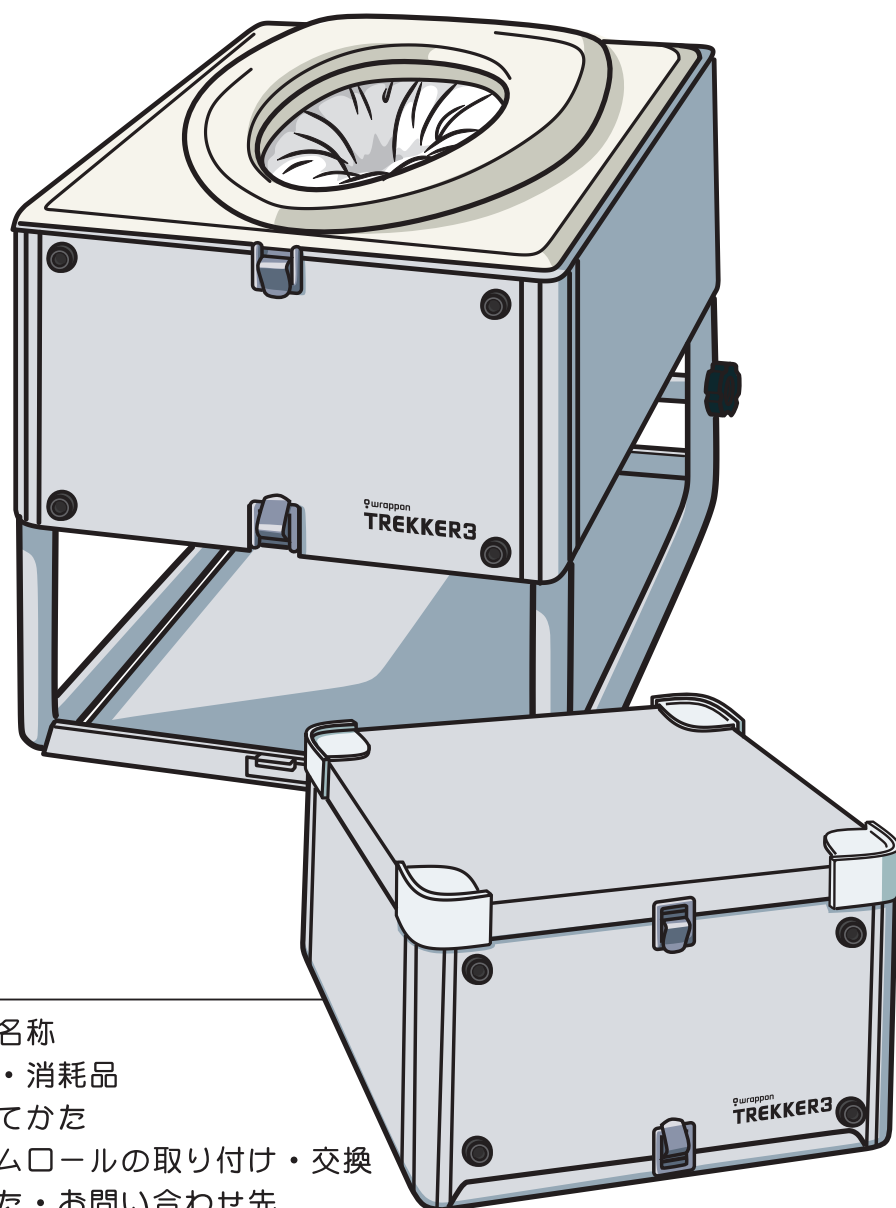

### もくじ

- P.1・・・各部の名称
- P.3・・・付属品・消耗品
- P.4・・・組み立てかた
- P.5・・・フィルムロールの取り付け・交換
- P.7・・・使いかた・お問い合わせ先



日本セイフティー株式会社

NIHON SAFETY CO., LTD.

# 各部の名称

「水を使わない」「臭わない」「お手入れ簡単」  
ラップで包む新発想のトイレ  
ラップポン・トレッカー3

## 【前面】

### 上ふた

収納時にキズやほこりを防ぐ

### 便座

簡単にとりはずせて  
お手入れ簡単

### インサイドカバー

排泄物の飛沫を防ぐ

### 本体

工具なしで組み立て簡単  
サビに強いアルミ製


### 脚

収納に便利な折りたたみ式

### 底ふた

取り出しやすい引き出し式

## 【ACアダプター】

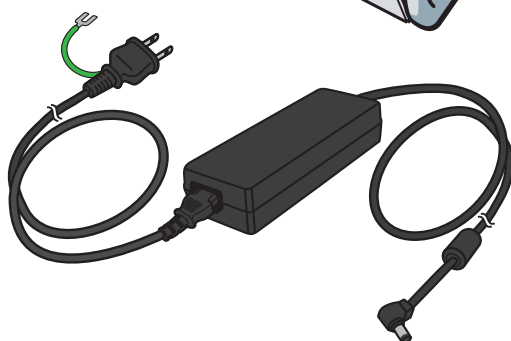


## 【背面】

取っ手

補強棒

ネジ

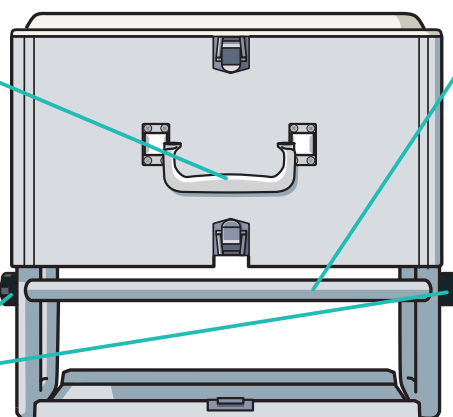


## 【内部】

便座・インサイドカバーを外した状態

フィルムガイド

天板

ローラー

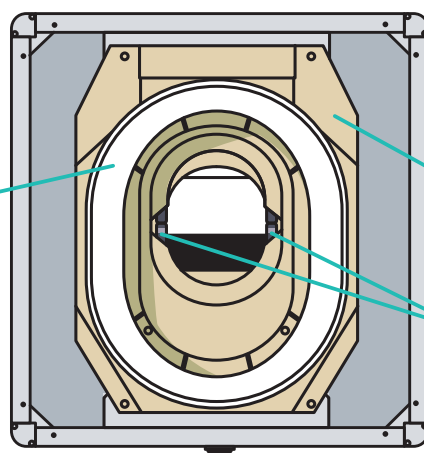

## 【手元スイッチ】

裏面にマジックテープ付

電源ランプ  
(緑)

表示窓

初期設定ボタン

状態ランプ (緑/赤/黄)

エラーランプ (赤)


フィルム送りボタン

作動ボタン




# 部品・付属品

ラップポン・トレッカー3と一緒に梱包されているものです。そろっているかご確認ください。

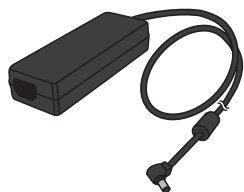


## ACアダプター

(品番: WRACKG02S)

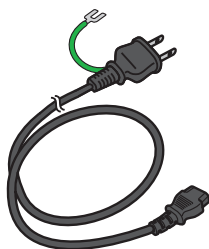

## 電源コード

(品番: WRPCKG02J)

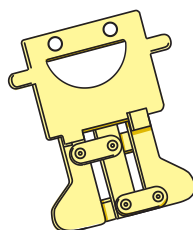

## ジグリン

フィルムロールをローラーにはさみこむ時に使用します。  
(品番: C0J10001S)



## 取扱説明書

ハンディ・マニュアルより詳しい説明書です。  
(品番: TRMAT301J)

## ハンディ・マニュアル

この冊子です。  
(品番: TRHA301J)

## 保証書

なくさないように大切に保管してください。

## ユーザー登録 ハガキ

## マジックテープ

「手元スイッチ」を固定するものです。お好きな場所に貼り付けてください。  
(品番: EVPTMTLH1J)

## 【ラップポン・トレッカー3として添付されているもの】

### 補強棒

底ふたを取り外すと入っています。  
脚部を補強します。  
(品番: TRST0001S)

### ネジ(2個)

補強棒の両端に付いています。  
補強棒を取り付けるときに使用します。  
(品番: TRBLN0B2S)

### インサイドカバー

便座の内側にセットされています。  
(品番: TRMUUS01S)

# 消耗品

ラップポン・トレッカー3をご使用の際に必ず使用します。  
ご注文は、裏表紙記載のフリーコールまで。



## カタメルサー・紙

(凝固剤約60回分)1袋  
(品番: C0C0STP1J)




## カタメルポリマー

(凝固剤50袋入)1箱  
(品番: C0C0P001J)



## フィルムロール


(約50回分)1本  
(品番: C0F150C1J)

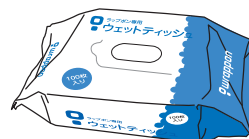


## ウェットティッシュ

(100枚入)1袋  
(品番: C0WT0002J)

# 組み立てかた

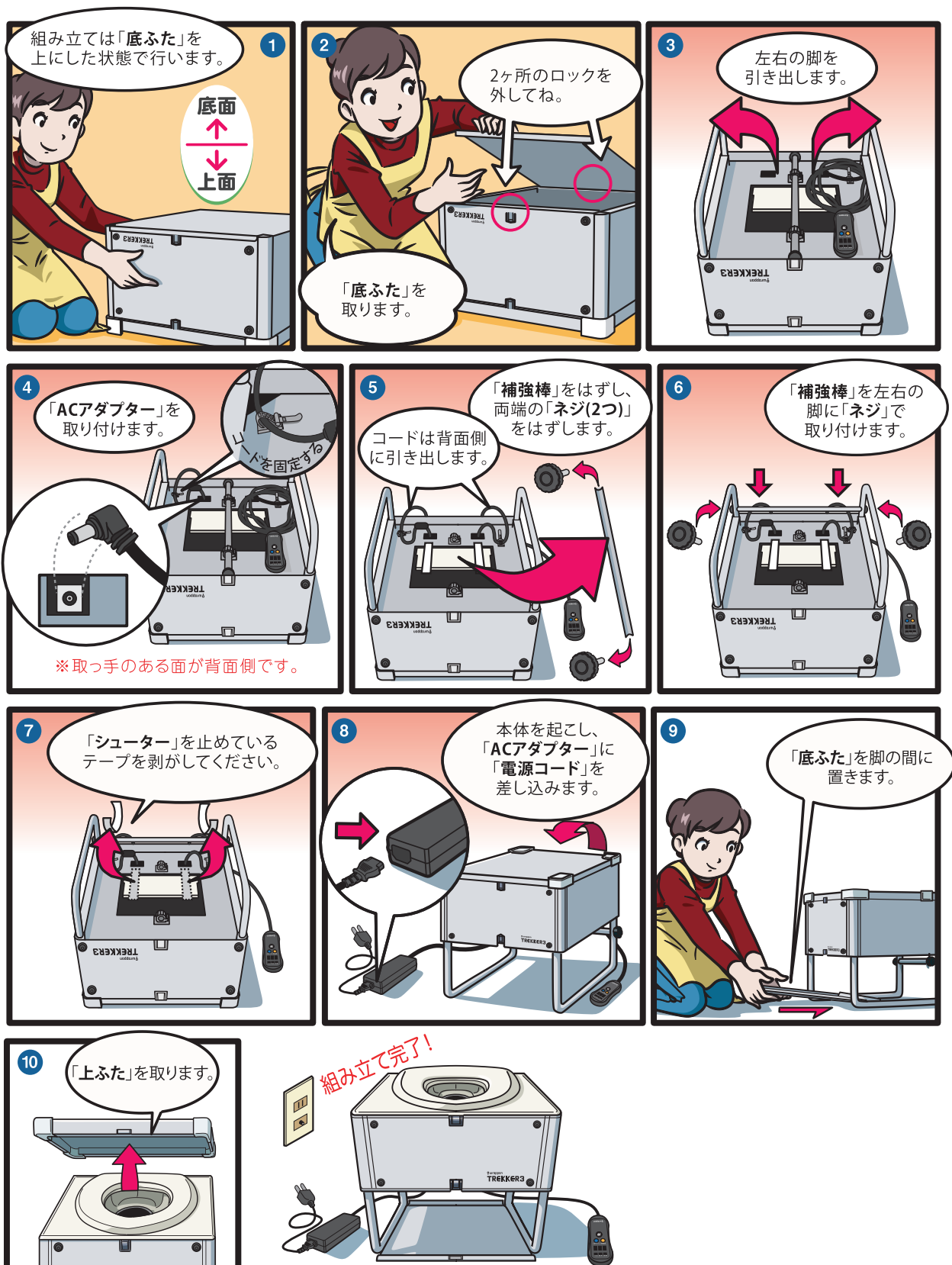


# フィルムロールの取り付け・交換

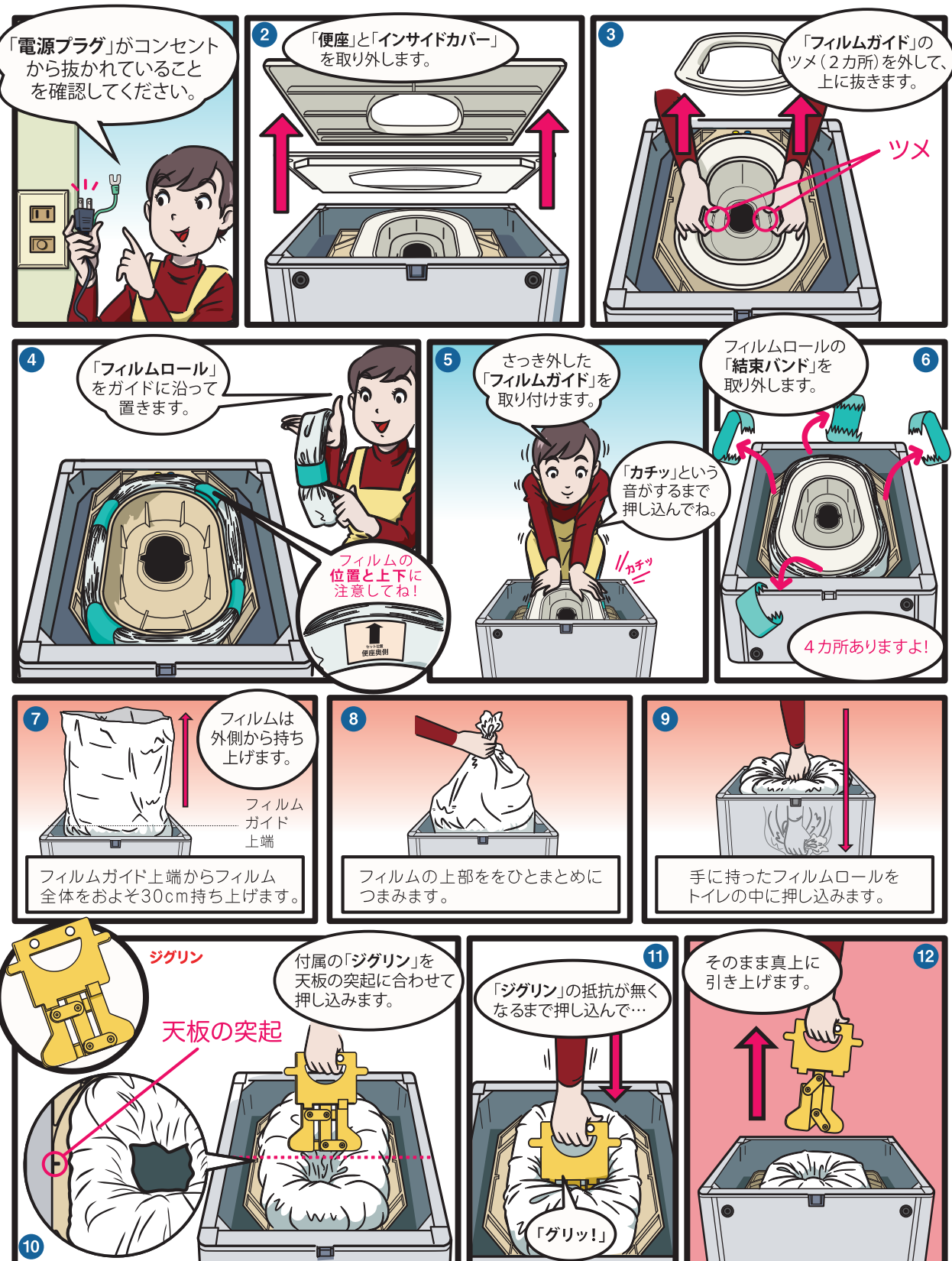



ご使用の前に、必ずフィルムロールを取り付けます。  
電源プラグがコンセントから抜かれているか確認してください。

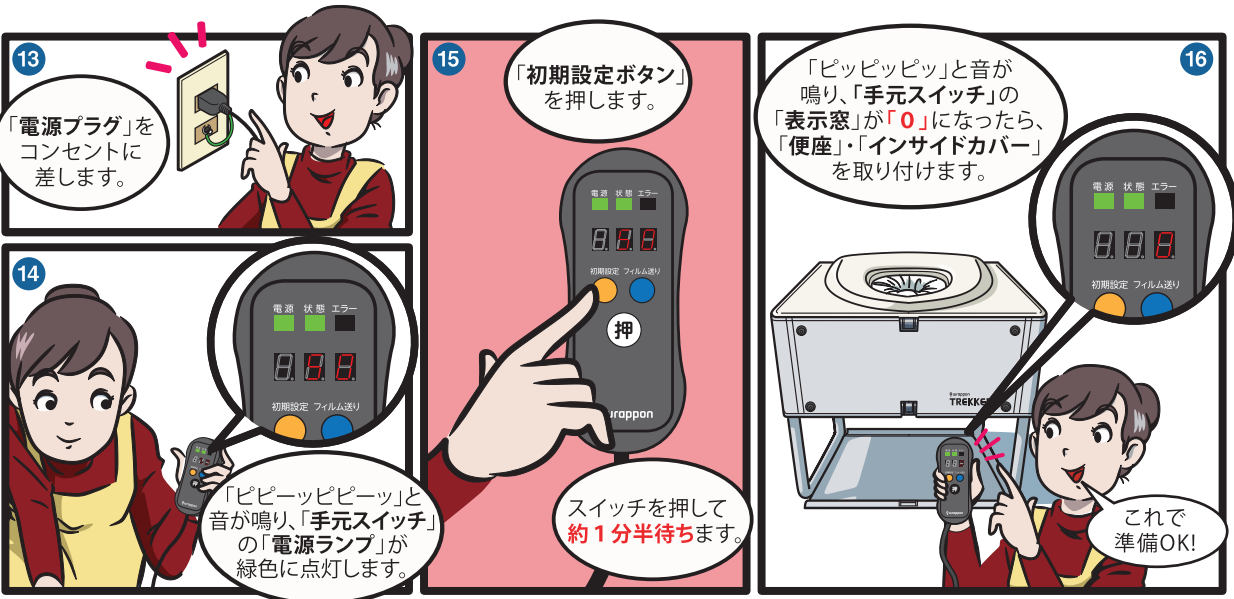


## フィルムに「STOP」の文字が出たら…(フィルムロールの交換)



# 使いかた

トイレの中に手を入れないでください。  
洋式便所の姿勢でお座りください。

**ご使用前に、手元スイッチの状態ランプが緑色に点灯していること、フィルムロールが取り付けられていることを確認してください。**

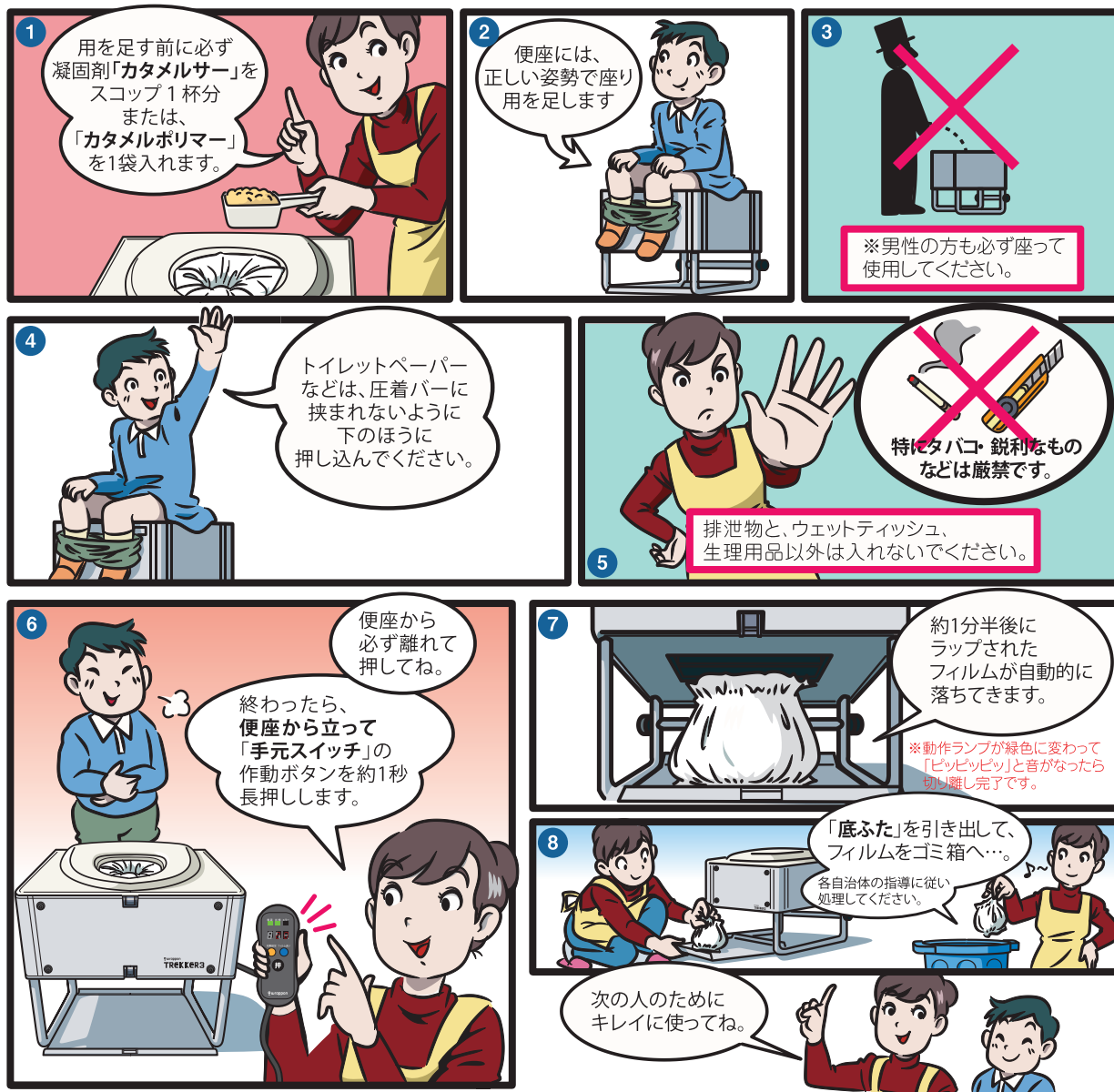

■ お問い合わせ先

■ 取扱店

**日本セイフティー株式会社**  
ラップオン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F  
e-mail : kaigo@nihonsafety.com URL : <http://www.wrappon.com>

ラップオン セイフティーコール **0120-208-718**

受付時間：月～金 9:00～17:30

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます  
いただくことがありますので、予めご了承ください。