


- 1 上フタを開けて、使用したおむつをフィルム内に投入します。

投入上限は、上限位置ランプ(赤点灯)までです。


上限位置ランプより上に出ると熱圧着時に挟み込んでしまうので、上限位置ランプより奥まで押し込んでください。

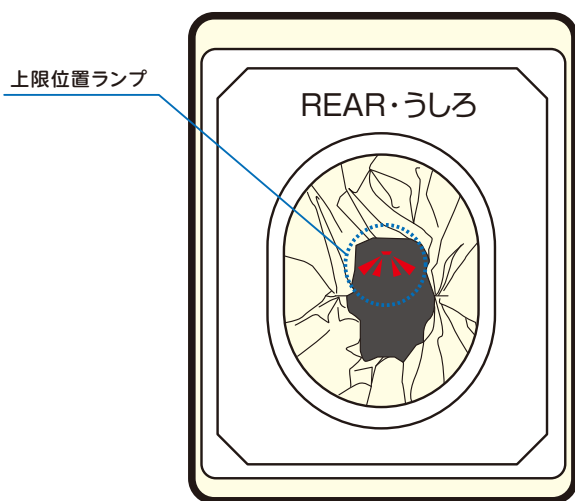

※前扉が開いていると上限表示が点灯しません。

- 2 上フタを閉じて、前面の「作動ボタン」を約1秒押ししてください。

ラップ動作がはじまりますので、上フタは開けないでください。

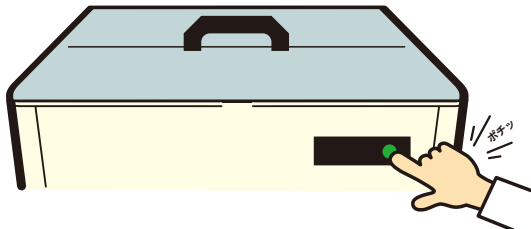


※ 作動ボタンを押して、処理が始まった状態で上フタ及び前扉を開けるとエラーとなり、処理が停止します。

- 3 表示画面のカウントダウンが0になると「ピッピッピッ」と音が鳴ります。ラップされたおむつは下のカゴに落ちます。



- 4 回収するときは前面の扉を開けてカゴを取り出し回収してください。

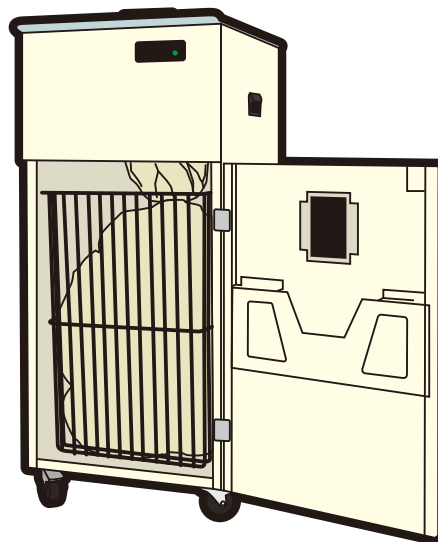

お問い合わせ先



日本セイフティー株式会社 ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F

e-mail : wrappon@nihonsafety.com URL : <https://www.wrappon.com>

ラップポン
セイフティーコール **0120-208-718**

受付時間

月～金 9:00～17:30


土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせていただきます。

ラップポン・ポケット Y-1


フィルムにSTOP
マークが出たら交換
してください

ポケット専用BOSフィルムの交換


- 1 上フタを開けて
インサイドカバーを
取り外す。

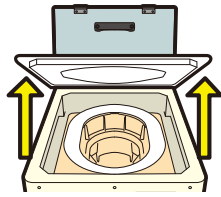


- 2 フィルム送りボタンを押す。
フィルムが20cm送り出されます。
フィルムがなくなるまで繰り返し操作をしてください。

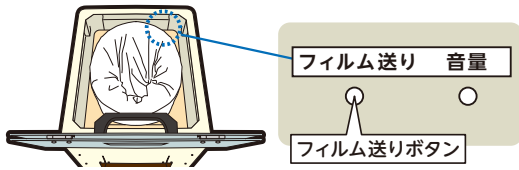


- 3 電源を抜き、
フィルムガイドを取り外す。
フィルムガイドのツメ(2箇所)を外して、
上に抜きます。

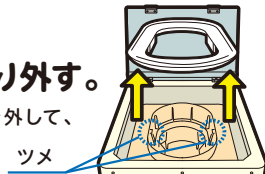

- 4 パケット専用BOSフィルムを
ガイドに沿って置く。
フィルムの位置と上下に
気を付けてください。

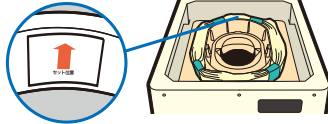


- 5 フィルムガイドを取り付ける。
フィルムガイドが「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

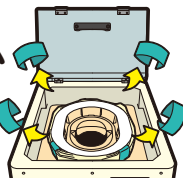


- 7 パケット専用BOSフィルム
を押し込む。


- ① フィルム外側のフィルム端を
持ちフィルムガイド上端から
おおよそ30cm上までフィルム
を伸ばします。

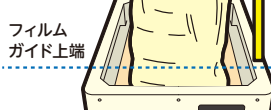


- ② フィルムの上部をひと
まとめにつまみます。

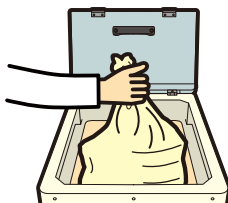

- ③ 手に持ったフィルムを投入口の
中に押し込みます。伸ばした
フィルムをたるみなく奥まで
押し込んでください。

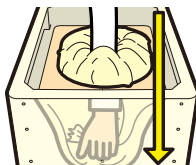

- 8 ジグリンでローラーにゆっくり押し込む。
天板の突起に合わせてジグリンで抵抗がなくなるまで垂直に
ローラーにゆっくり押し込んでください。

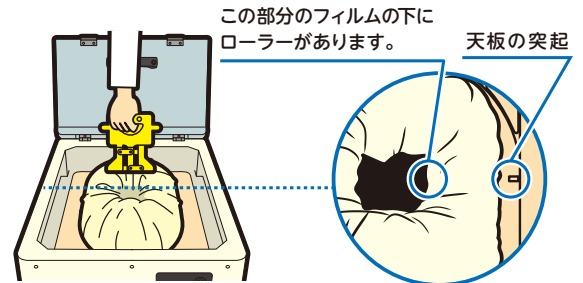


必ずフィルムが左右のローラーに挟まれていることを確認してください。フィルムがはずれている時は、もう一度、ジグリンを差し込んでください。

- 9 上フタを閉じて、電源を入れる。
上フタを開け、フィルム送りボタンを
押し、フィルム送りが停止するまで押し
続ける(約3秒)

- 10 インサイドカバーを取り付け、上フタを
閉じる。表示部の作動ボタンを
約1秒押して、初期圧着をする
ラップ動作中は作動中ランプが緑に点滅します。
※この操作を行わないと、袋の底が圧着されません。

フィルム交換後は必ずおむつを入れずに
1回ボタンを押してください。

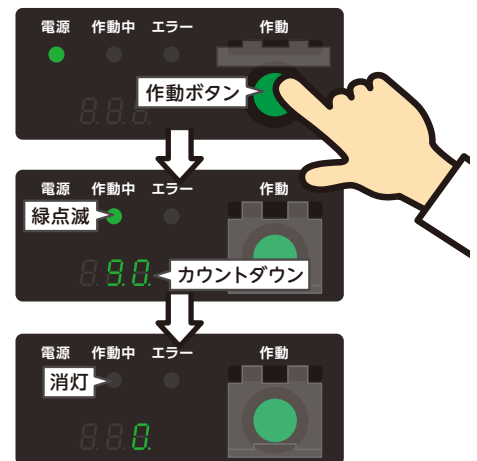

ラップ動作は約90秒かかります。
表示画面にラップ完了までの残り時間の目安(約90秒の
カウントダウン)が表示されます。
また、ラップ動作終了時には「ピッピッピ」と音が鳴り、表示部の
作動中ランプが消灯します。

- 11 「表示部」の動作中ランプが消灯したら
切り離されたフィルムを取り出し、
ポケット専用BOSフィルムの
取り付けは完了です。