#### **■** ラップポン·エール2(ベージュ·ダークブラウン)

		普通便座	やわらか便座	暖房便座
ベージュ	品番	A2SEN02BJH	A2SES02BJH	A2SEW02BJH
\-\J_1	JANコード	4589922490404	4589922490442	4589922490480
ダークブラウン	品番	A2SEN02DJH	A2SES02DJH	A2SEW02DJH
3-77777	JANコード	4589922490411	4589922490459	4589922490497
価	<u>格</u>	140,800円(税込)	146,300円(税込)	157,300円(税込)
TAIS⊐	ード	00942-000013	00942-000014	00942-000015
寸	法	本体…幅508mm、奥行き530mm、 肘高(便座面から)…180、210、240		面高…400、430、460mm
質	量	本体約25kg		
材	質	椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装) やわらか便座…EVA樹脂・ポリプロ		ノプロピレン樹脂 S樹脂
消費電	電力	動作時75W、待機時5W以下	電源	AC100V±10V





#### ラップポン・ブリオ

	普通便座	やわらか便原	<b>举</b>
品 番	BRSE0003JH	BRSE0002	JH
JAN⊐−ド	4589922490589	45899224	190305
価 格	98,780円(税込)	101,750円	](税込)
TAIS⊐−ド	00942-000016	00942-00	0012
寸 法	本体…幅480mm、奥行き510mm、高さ800、830、860mm 座面高…400、430、460mm 肘高(便座面から)…210、240mm 座幅…420mm		
質 量	本体約21kg		
材質	椅子…ラバーウッド(ウレタン塗装)、スチール 普通便	巫…PP やわらか(	更座…発泡ポリエチレン・ポリプロピレン樹脂
消費電力	動作時75W、待機時5W以下	電源	AC100V±10V



#### ラップポンのご使用には別途消耗品の購入が必要です。(消耗品は本体に付属しておりません)

#### ハンディーバッテリー

品 番	BALPHB01JH
JAN⊐−ド	4589922490596
価 格	28,600円(税込)
電池容量	6900mmAh
本体質量	650g
LED残量表示	LED5段階表示
USB出力	5V
出力電圧	最大2A
充電池	リチウムイオンバッテリー
寸 法	幅86mm、高さ162mm、 厚み30mm
充電時間	約4時間

■ 専用凝固剤カタメルサーT3

C0C0T3P1J 4589922490336 60(通常使用で約60回分)

1,100円(税込)



#### フィルムカセットタイプ3

材質	ポリエチレンフィルム
価 格	2,200円(税込)
容量	約60回分
JAN⊐−ド	4589922490329
品番	C0F1C360J



#### ■ フィルムカセットBOSタイプ

品番	C0F1CB50J
JANコード	4589922490572
容量	約50回分
価 格	4,400円(税込)
材質	ポリエチエレン※防臭フィルム (BOSフィルム)



#### ウェットティッシュ

14417 18	
JANコード	4589922490077
価格	605円(税込)
材質	ノンアルコール、無香料(1袋・100枚入り)
100 10	



#### ラップポン・エール2 / ラップポン・ブリオ 共通消耗部材

下記の部品は、ご利用状況及びご利用回数により、交換が必要になる場合があります。 1.圧着ゴム交換:3,278円(税込) 2.ヒーター交換:7,568円(税込) 3.圧着ゴム/ヒーターセット交換:8,844円(税込)

■お問い合わせ先






## **日本セイフティー株式会社**

#### ラップポン事業部

〒102-0082 東京都千代田区一番町21番地 一番町東急ビル11F

ラップポン セイフティーコール 1910 120 - 208 - 718

土・日・祝祭日・年末年始・その他都合によりお休みさせて いただくことがありますので、予めご了承ください。

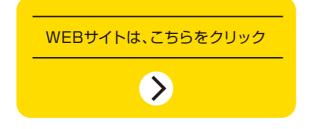



# ₽ラッスポン 介護施設向けカタログ

臭わず、掃除の手間がなく、二次感染の予防に。 また、災害時も安心してご利用いただけます。 介護施設に最適なポータブルトイレをご提案します。





### 自動ラップ式ユニットとは

水を使わず、熱圧着によって自動で排泄物と臭いを密封するため、 バケツ洗浄がいりません。

また、音声案内が搭載されているため、更に使いやすくなりました。



かんたん 操作 安心の

#### 使い方はとっても簡単



#### 1.専用凝固剤を入れる

排泄物の水分を凝固させるために使用し ます。



#### 2.作動ボタンを押す

排泄後、自動でラップを開始します。 「処理を開始します」と音声案内が流れます。 ラップ終了まで約90秒かかります。 処理終了までをリモコンにカウントダウン 方式で表示します。



音声案内

#### 3.ラップ済み袋を取り出す

終了音が鳴り、「処理が完了しました。トレー から袋を取り出してください」と音声案内が 流れると切り離し完了です。

トレーを引いて、毎回ラップ済み袋を取り出 してください。

## 自動ラップ式「ラップポン」は 介護ロボット導入支援事業対象品です!

介護ロボット導入支援事業補助金を用いれば、1機品につき導入経費の 1/2(上限30万円)の補助を受けることができます。

(詳細については、自治体により異なりますので、ご確認お願いします。)

## ₽ラッスポン・エール2IC

- ●ラップポン・エール2
- ●ハンディーバッテリー(2個)

(税込 ベージュ品番: A2SEN02BIC ダークブラウン品番: A2SEN02DIC

#### やわらか便座

ベージュ品番: A2SES02BIC ダークブラウン品番: A2SES02DIC **203,500**円

| 咳房便座| ベージュ品番: A2SEW02BIC ダークブラウン品番: A2SEW02DIC



### ₽ラッスポン・ブリオIC

- ●ラップポン・ブリオ
- ●ハンディーバッテリー(2個)

155,980円

やわらか便座 **158,950** 円



※消耗品は補助金対象外のため、含まれておりません。

#### 椅子の機能

### ₽ラッスポン・エール2IC



#### 選べる2色

部屋の雰囲気や好みに合わ せて、ベージュ・ダークブラウン の2色から選べます。

#### 移動も楽々

キャスターが付いているので、 楽に移動ができます。



#### 後方介助に便利

座面を後方に倒せるので、 後ろからの介助に便利です。

#### バケツタイプにも

状態に合わせて、バケツタイプ にも簡単に替えられます。 (標準付属品)



#### 標準装備

左右どちらにも取り付けられる ペーパーホルダーが付いてい ます。

#### 座面の高さ階調節

座面の高さが3段階で調節 可能です。(40·43·46cm)



#### 跳ね上げ式の肘

跳ね上げ式のため、ベッド からの移乗がスムーズに行え ます。

#### 肘掛の3段階調節

使う方の体格や症状に合わ せて高さ調節ができます。 (18·21·24cm)

### ₽ラッスポン・ブリオIC



#### 移乗に便利

ベッドからの移乗がスムーズ に行えるように、左右の肘掛 がネジで取り外せます。



#### 2タイプの便座

通常のPP製の便座の他に、 長時間座る方や、おしりの やせた方にも、やさしい座り 心地のやわらか便座もご用意 しています。



#### 肘掛2段調整

使う方の体格や症状に合わ せて高さ調節ができます。 (21·24cm)



#### 3段階調整の脚

体型やお好みに合わせて座面 の高さが3cm毎に3段階の 調節ができます。 (40·43·46cm)



#### 今までの介護から変わること



#### 衛生面と臭い

バケツ洗浄が不要なため、 二次感染の予防になり、 施設内・院内に広がる 臭いの問題を解決 できます。



#### 掃除の手間

バケツが不要で介助者の 負担を軽減します。 自尊心を持った排泄が できます。



### ランニングコスト

通常のポータブルトイレは、 バケツ洗浄に消臭剤と 水600必要で、さらに掃除の 手間を考えればラップポンは 低コストです。



#### 自立支援

利用者が自身で排泄したいという 前向きな気持ちになり ADL(日常生活活動)の 維持・向上に つながります。



#### 災害時も安心

付属のバッテリーを使用することで、 停電時も使用でき、 災害の際にいつもと同じものを 変わらず使える安心感が 得られます。



#### 排泄ケア業務に係る時間を人件費に換算すると

導入前の排泄ケア業務時間





できた時間で 介護の質の向上を 図れます!

作業時間の差 (40分)を時給換算 ※時給1000円の場合

666円

(1ヶ月)


30日

1ヶ月でおよそ 19,980円 お得に

#### アンケート

#### 社会福祉法人誠友会 特養老人ホーム 木崎野荘 様

導入前にポータブルトイレを用いた排泄ケアに係る介護職員等を対象に一連の業務に係る時間測定等と身体的・精神的負担を問うアンケートを実施。

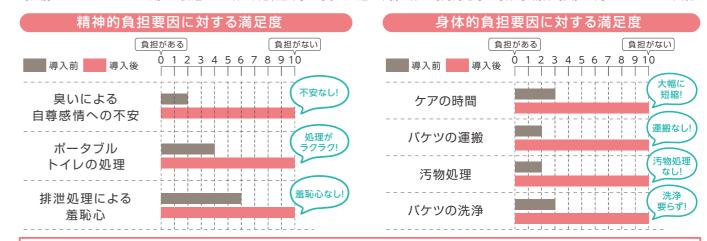


#### 介護施設でで使用いただき、高評価をいただいてます。

#### 施設職員の皆様の声

非常に処理が 楽でした。 尿量も確認できて 良かった。



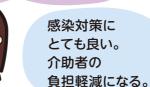


排泄物の処理に

軽減になった。

かかる労働負担の



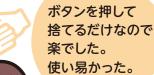

#### 介護ロボット導入支援事業を利用して導入した施設様の声

### 医療法人社団 仁鷹会 介護老人保健施設 陽だまり

#### 介護職 堀口様

今まではポータブルトイレの中に入っているバケツを取り出して外に持ち出してから消毒 だったり、洗浄をしていましたので手間だったり、便が空気に触れたり、利用者さんの 目に触れてしまったり。そこの部分がすごく気になっていました。

ラップポンは(その部分が気にならな いので) すごくいいと思う。

排泄物が密閉した状態で出てくる所は、 感染予防に便利ですね。

清潔を保持するという所と、感染症を 広げない事においてすごく長けている と思います。



#### ご使用者 土肥様

毎晩使ってます。(ベッドサイドに あるから) 起きたらすぐに座れるか らね。臭いも気にならない。



ラップポン(自動ラップ式排泄処理ユニット)は排泄支援加算が利用できます。

介護ロボット ONLINE









感染症の恐れ

### 備えた整備がもたらす、安心と安全

災害時に最優先で求められることは「ご利用者、施設職員、介護者の命と安全、生活の継続」です。 いかに普段と近い形での生活を可能にできるか。トイレの整備は重要です。

₽ラッスポン なら

水が不要ですぐに 清潔・安全に使用可能

二次感染の リスクも軽減 いつもと同じトイレを 普段通り使用できる



### 平成30年7月豪雨災害の現場から

日本財団HP「簡易トイレの設置を通じた被災地支援」より一部抜粋

「豪雨災害の時はみんなで二階に避難しました。足腰が弱い人もいるので移動が大変でした。電気も水道も 止まってしまい、非常用電源も数時間で切れてしまいました」宇和島市吉田町にあるグループホーム「よしの里」で、 管理者として働く清家さんは、発災直後の様子を振り返ってくれました。

グループホーム「よしの里」には約10名の要介護者がいますが、いまだに水を使用できず、自衛隊からの給水 支援で生活をしているのが現状です。そこで日本財団では、この介護施設にも簡易トイレを設置しました。 今回ご支援いただいた簡易トイレは一般的な簡易トイレと違い、排泄物の入った容器を洗ったり、便座周りを 何度も手洗いしたりする必要がないので、かなりの節水につながっています」清家さんは簡易トイレの特長を 説明してくれました。

使用できる水に限りがあるため、グループホーム「よしの里」では徹底した節水を余儀なくされています。使うの は必要最低限の水だけです。そうした中、日本財団が設置した簡易トイレは、水の使用量が少ないので施設側 にも重宝されています。

「椅子の高さが調節可能で、立ち上がったり座ったりが楽にできるのも、高齢者の方々にはありがたいですね」 清家さんは簡易トイレの使い勝手の良さについても

教えてくれました。

従来型の仮設トイレは和式の場合が多く、便器まで に段差がある作りのため、介護施設や避難所 で高齢者に使用してもらうには負担を要します。 しかし、高齢者でも使用しやすい設計になっている ことで、災害時の要援護者でも安心して利用でき ます。





### 普段使いしながら、災害時にも対応できます

# □ラッスポン・エール2防災セット

ラップポン・エール2 / ハンディーバッテリー /フィルムカセット / 専用凝固剤カタメルサーT3 / ウェットティッシュ(3個)

フィルムカセット 174,900 円



# □ラッスポン・ブリオ 防災セット

ラップポン・ブリオ / ハンディーバッテリー / フィルムカセット / 専用凝固剤カタメルサーT3 / ウェットティッシュ(3個)

132,880隔

30.680隔



#### BOSタイプとは

特殊防臭フィルムです。排泄物を密封し、約1ヶ月放置しても臭いが漏れません。

#### タイプ3とは

単層フィルムで、通常の介護にご使用頂くタイプです。